


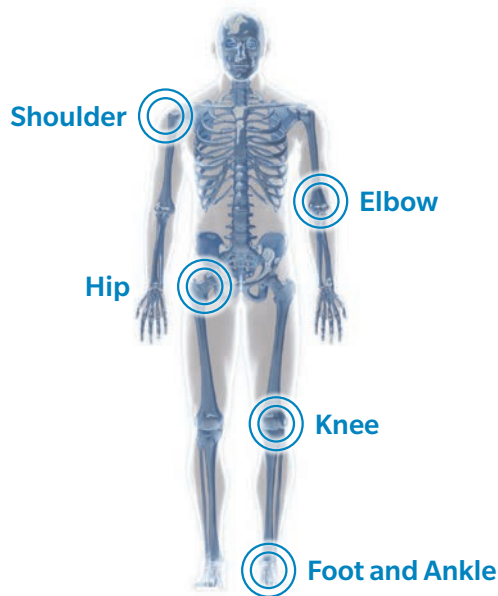

Elbow

- 側副靱帯修復、再建
- 上腕二頭筋長頭腱固定

Knee

- 側副靱帯修復、再建
- 膝蓋腱修復

Foot and Ankle

- 内・外側靱帯修復、再建
- 中足部靱帯修復
- アキレス腱修復

おもな適応症例

引抜強度 24kg(皮質骨), 20kg(海綿骨)
239 N anchor pullout strength¹

1号超高分子量ポリエチレン
#1 UHMWPE
MaxBraid Suture

#5 polyester sleeve
5号ポリエステルアンカー

#5 tapered needles
5号丸針

912073 JuggerKnotインスツルメントキット 1.4MMショート
(ドリルガイド、1.4MMショートドリルビット入り)

販売名: JuggerKnot 単回使用インスツルメント
医療機器製造販売承認番号: 223ADBZX00036000
規制区分: 管理医療機器
一般の名称: 単回使用整形外科用バー

912068 JuggerKnotスーチャーアンカー 1.4MM SHORT #1MB針付

販売名: JuggerKnot ソフト アンカーシステム
医療機器製造販売承認番号: 22300BZX00197000
規制区分: 高度管理医療機器
一般の名称: 靱帯固定具
機能区分: 固定用内副子・F1-b-2-2

912072 JuggerKnotインスツルメント 1.4MMショートガイド

販売名: 関節鏡手術器械
医療機器製造販売届出番号: 13B1X10228ST0003
規制区分: 一般医療機器
一般の名称: 靱帯・腱手術用器械

JuggerKnot Soft Anchor 1.4mm Short




骨孔1.4mm
骨孔長16mm



Step 1 Drilling



Step 2 Insert

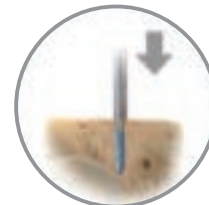

海綿骨のみでも
固定可能



Step 3 Pull back

手術テクニック



Scapho-Lunate

Thumb MP

Little finger PIP

DIP

Hand and Wrist

Hand and Wrist

- 伸筋 / 屈筋腱修復
(マレットフィンガーなど)
- 側副靭帯修復
(母指MP関節、小指PIP関節など)
- 舟状骨 / 月状骨離解

おもな適応症例

引抜強度 11.8kg (2-0号)

116 N anchor pullout strength With
#2-0 suture

2-0号 or 3-0号
超高分子量ポリエチレン
#2-0 or #3-0 UHMWPE
MaxBraid Suture

引抜強度 9.1kg (3-0号)

89 N anchor pullout
strength With #3-0 suture

1.0mm ドリルビット同梱

#1 polyester sleeve
1号ポリエステルアンカー

スリーブプロテクターにより
挿入ガイド不要

T-28 tapered needles
T-28丸針

912076 JuggerKnotスーチャーアンカー 1.0MM MINI #2-OMB針付(ドリル付)
912082 JuggerKnotスーチャーアンカー 1.0MM MINI #3-OMB針付(ドリル付)

販売名: JuggerKnot ソフト アンカー ミニ
医療機器製造販売承認番号: 22400BZX00379000
規制区分: 高度管理医療機器
一般名称: 靱帯固定具
機能区分: 固定用内副子・F1-b-2-2

JuggerKnot Soft Anchor 1.0mm Mini

骨孔1.0mm

骨孔長8mm

8mm

Step 1 Drilling

Step 2 Insert

Step 3 Pull suture

手術テクニック