

QUAD TENDON SIDE



KOH QTB

Harvest System



PATELLA BONE SIDE

QUAD TENDON SIDE

BOTH SIDE CUTTER ボースサイドカッター

斜めにカットされた両刃のカッターを用いることで大腿四頭筋腱を幅 10 mm で切開します。

腱の厚みはカッターを付け替えることで 5、6、7 mm から選択できます。カッターホルダーに装着して使用します。



REVERSE SIDE CUTTER リバースサイドカッター

斜めにカットされた片刃のカッターを用いることで大腿四頭筋腱を部分層で切開します。

腱の厚みはカッターを付け替えることで 5、6、7 mm から選択できます。カッターホルダーに装着して使用します。




CUTTER HOLDER

カッターホルダー

ボースサイド、リバースサイドの両方のカッターを装着できます。

先端のスリットから持針器を用いてカッターをスライドして装着します。

大腿四頭筋腱の切開する全長は、ホルダー上部のメモリを用いることで決定できます。

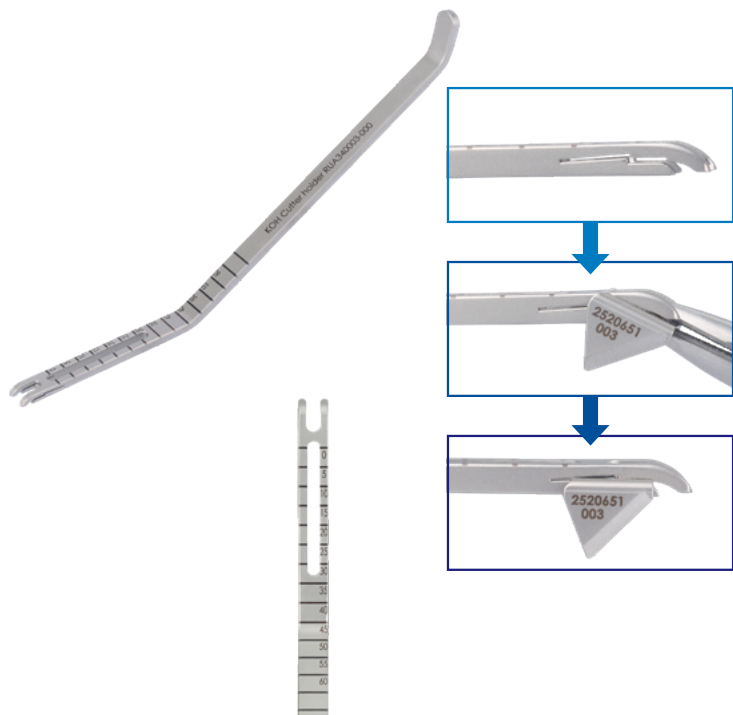


ELEVATOR L&R

エレベーター

大腿四頭筋腱を部分層で切開するために腱を翻転させて切開した部分を露出させることができます。


ゲージを用いることで計画した厚みを切開することができます。

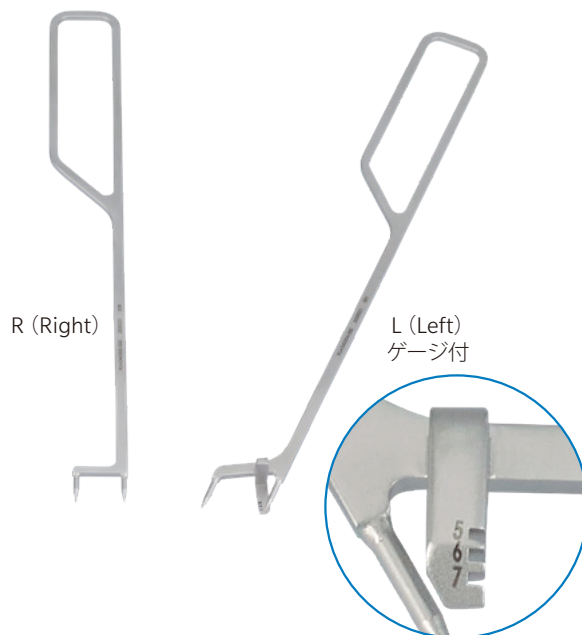

SUBMARINE CUTTER サブマリンカッター

ボースサイドカッターとリバースサイドカッターで大腿四頭筋腱を切開した後、サブマリンカッターを用いることで腱の中樞を切離します。

ハンドル先端に腱を引っかけてロックした後、ホルダーを付けた刃を押し出すことで計画した腱の長さを切離できます。

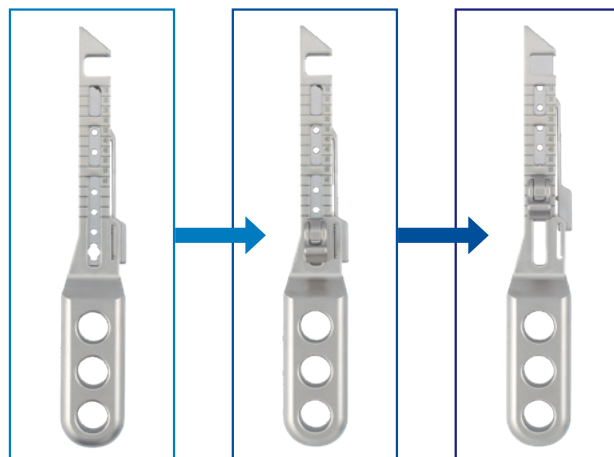

FOOTBALL FISH RETRACTOR フットボールフィッシュレトラクター

大腿四頭筋腱を切開するために、皮切から刺入することで視野を確保できます。アーム部分のくぼみにスコープを置くことで、ブレずに皮下の鏡視映像を確認することが可能です。



PATELLA BONE SIDE

COBRA HEAD SHEATH コブラヘッドシース

膝蓋骨上にシース先端を設置し、キルシュナー鋼線（Φ 1.5 mm）で固定します。シース内にトレフィンドリルを挿入することで、任意のサイズの骨付き大腿四頭筋腱を採取可能です。径は 9、10 mm を選択できます。



TREPHINE DRILL SHORT トレフィンドリル ショート

シース越しにドリル後端のメモリを確認しながら回転させることで、任意の長さ（最大 15 mm）の骨付き大腿四頭筋腱を採取可能です。径は 9、10 mm を選択できます。



TREPHINE DRILL ADAPTER トレフィンドリルアダプター

ハドソンドリルチャックと連結することが可能です。



Ordering Information

KOH QTB ハーベストシステム手術器械（消耗品）		
カタログ番号	品 名	規 格
RUA340001-150	KOH QTB ボースサイドカッター	幅 10 mm × 厚さ 5 mm
RUA340001-160	KOH QTB ボースサイドカッター	幅 10 mm × 厚さ 6 mm
RUA340001-170	KOH QTB ボースサイドカッター	幅 10 mm × 厚さ 7 mm
RUA340002-050	KOH QTB リバースサイドカッター	厚さ 5 mm
RUA340002-060	KOH QTB リバースサイドカッター	厚さ 6 mm
RUA340002-070	KOH QTB リバースサイドカッター	厚さ 7 mm
RUA340006-000	KOH QTB サブマリンカッター	刃
RUA0015-090 *	KOH トレフィンドリルショート	径 9 mm
RUA0015-100 *	KOH トレフィンドリルショート	径 10 mm

※消耗品は全て 4 回以上の使用を禁止する

販売名：KOH QTB Harvest System手術器具
医療機器製造販売届出番号：25B1X10004000330
規制区分：一般医療機器
一般的名称：靱帯・腱手術用器械
製造販売業者：株式会社ACTYPower

*販売名：KOH手術器具
医療機器製造販売届出番号：25B1X10004000272
規制区分：一般医療機器
一般的名称：靱帯・腱手術用器械
製造販売業者：株式会社ACTYPower

KOH QTB ハーベストシステム手術器械		
カタログ番号	品 名	規 格
RUA340003-000	KOH QTB カッターホルダー	
RUA340004-000	KOH QTB エレベーター	L ゲージ付
RUA340005-000	KOH QTB エレベーター	R
RUA340007-100	KOH QTB サブマリンカッター	ハンドル
RUA340007-200	KOH QTB サブマリンカッター	ホルダー
RUA340008-090	KOH QTB コブラヘッドシース	径 9 mm
RUA340008-100	KOH QTB コブラヘッドシース	径 10 mm
RUA340009-000	KOH トレフィンドリルアダプター	
RUA340010-000	KOH フットボールフィッシュレトラクター	

QUAD TENDON SIDE

大腿四頭筋腱用器械 滅菌ケース



PATELLA SIDE

膝蓋骨用器械 滅菌ケース



KOH QTB ハーベストシステム滅菌ケース		
カタログ番号	品 名	規 格
RUA340011-100	KOH QTB ハーベストシステム滅菌ケース	Quad Tendon Side
RUA340011-200	KOH QTB ハーベストシステム滅菌ケース	Patella Side

【禁忌・禁止】、【使用目的又は効果】、【使用上の注意】、及び不具合・有害事象等の情報については、本製品の添付文書をご参照いただくか、弊社営業担当者までご連絡ください。製品のさらなる最新の情報は、<https://www.zimmerbiomet.com/ja> にてご確認ください。

本資料は、作成あるいは改訂時の情報に基づき記載しております。薬事情報あるいは医療保険に関する情報については更新されている場合がございます。正しい情報については、当該製品の最新の添付文書及び以下厚生労働省ウェブサイトの「医療保険」の最新の診療報酬改定に関する資料をご照会ください。

[厚生労働省 医療保険ページ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/iryouhoken/index.html



ジンマー バイオメット

本社 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー12階
カスタマーサービス Tel: 03-6700-1071 Fax: 0463-30-4821