


ZEOS ACCUCUT RF System


The New Arthross Plasma RF System

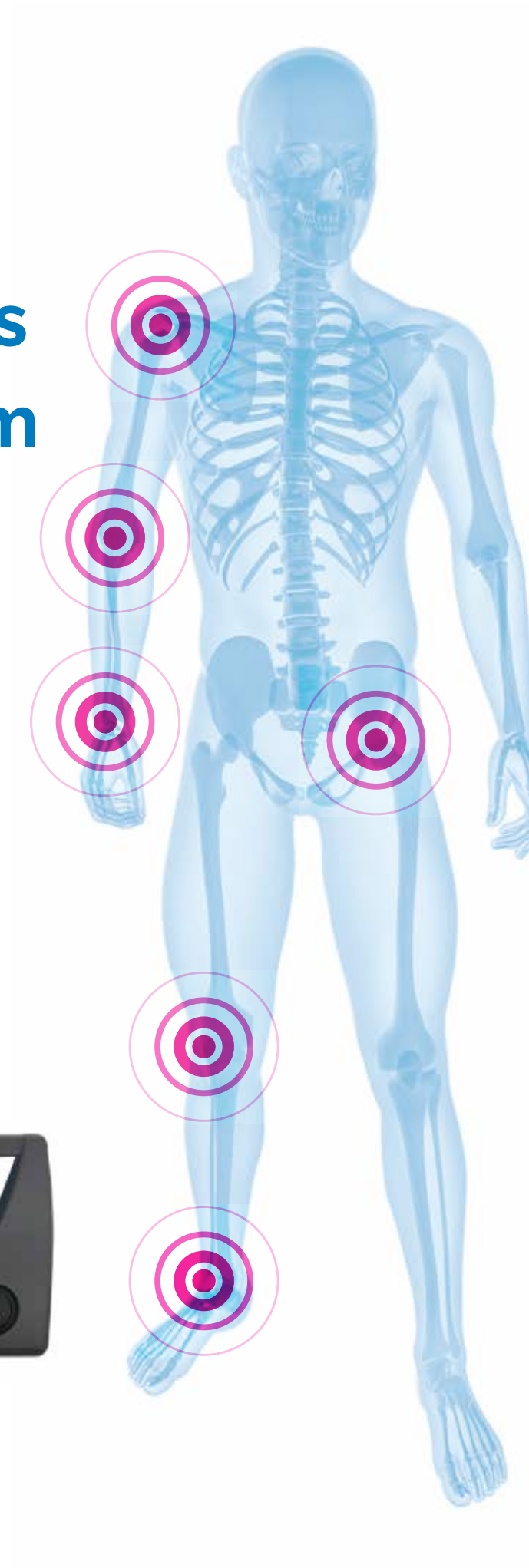

ACCUCUT RF System は、安定したプラズマを発生させることにより、安全で正確な操作が可能になっています。

また、低温で分子崩壊を発生させるため、熱浸透を極力抑え、周囲の組織損傷も抑えられます。

直感的に操作しやすいコンパクトなコンソールに、汎用性の高い5種類のプローブを揃えており、多様な外科手術に対応可能なバイポーラシステムです。

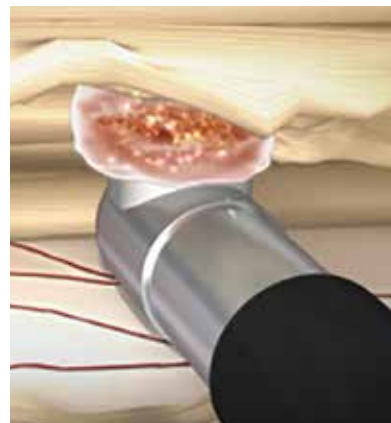


蒸散 (Ablation)

生成された非常に強力なエネルギーで組織内の分子結合を切断し、40～70℃の比較的低い温度で組織を急速に溶解させるため、迅速かつ低温で組織の切除を行うことが可能です。

凝固 (Coagulation)

高温熱凝固とは異なり、ACCUCUT RF System のプラズマ技術は温度を40～70℃に調整することで正常組織への熱損傷を抑え、コラーゲン分子の螺旋構造を凝固させるため、細胞の生存率を維持します。

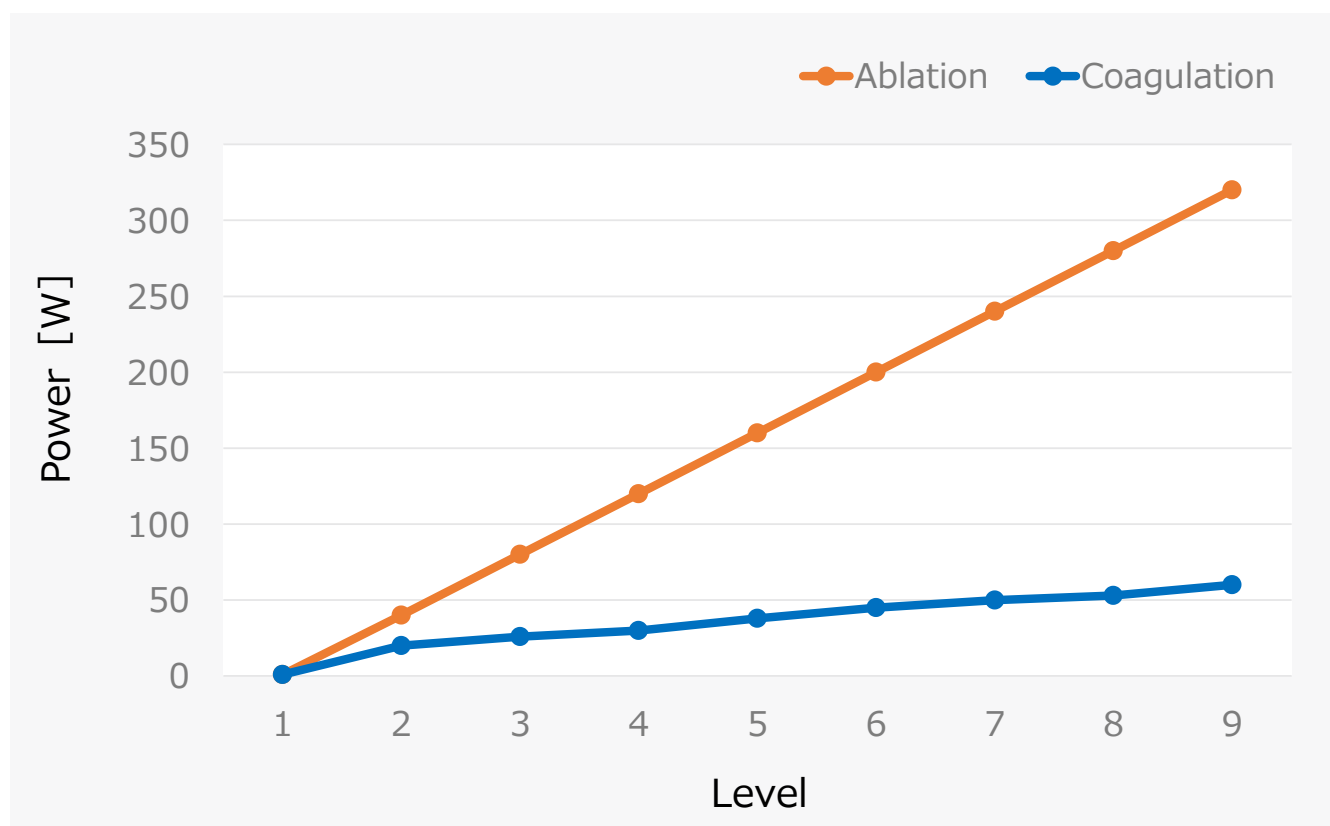


優れた熱安定性


ACCUCUT RF System は、素速い応答でプラズマを生成します。適正なエネルギーを供給することにより、プラズマの大きさを 9 段階で正確に調整できます。

正確なプラズマにより、正常組織への熱エネルギーによる損傷が抑えられ、蒸散 (Ablation) と凝固 (Coagulation) をスムーズに行うことができます。

また、出力と吸引のバランスを考慮したプローブ先端の電極形状により、熱安定性を高めています。

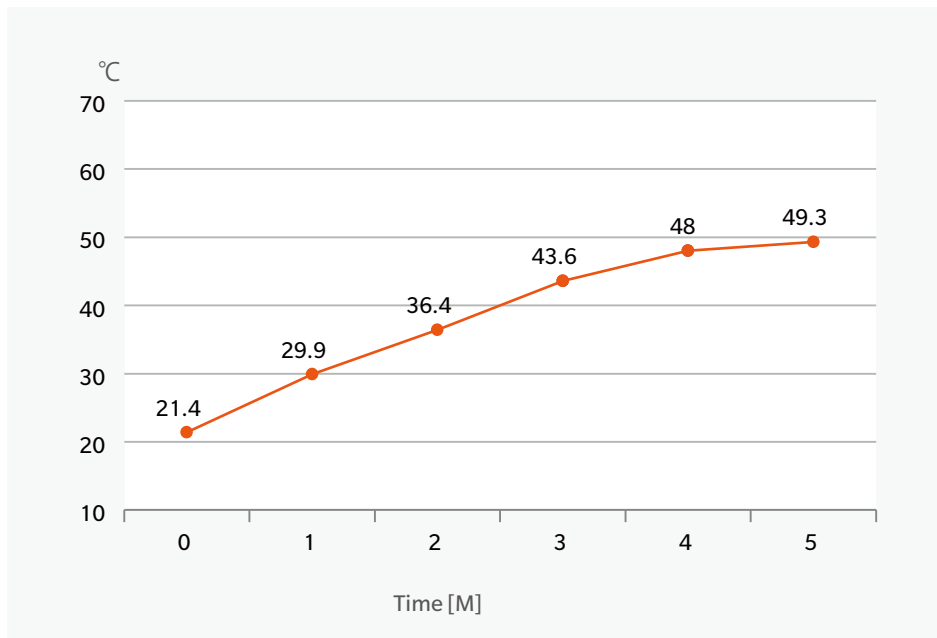

コンソール

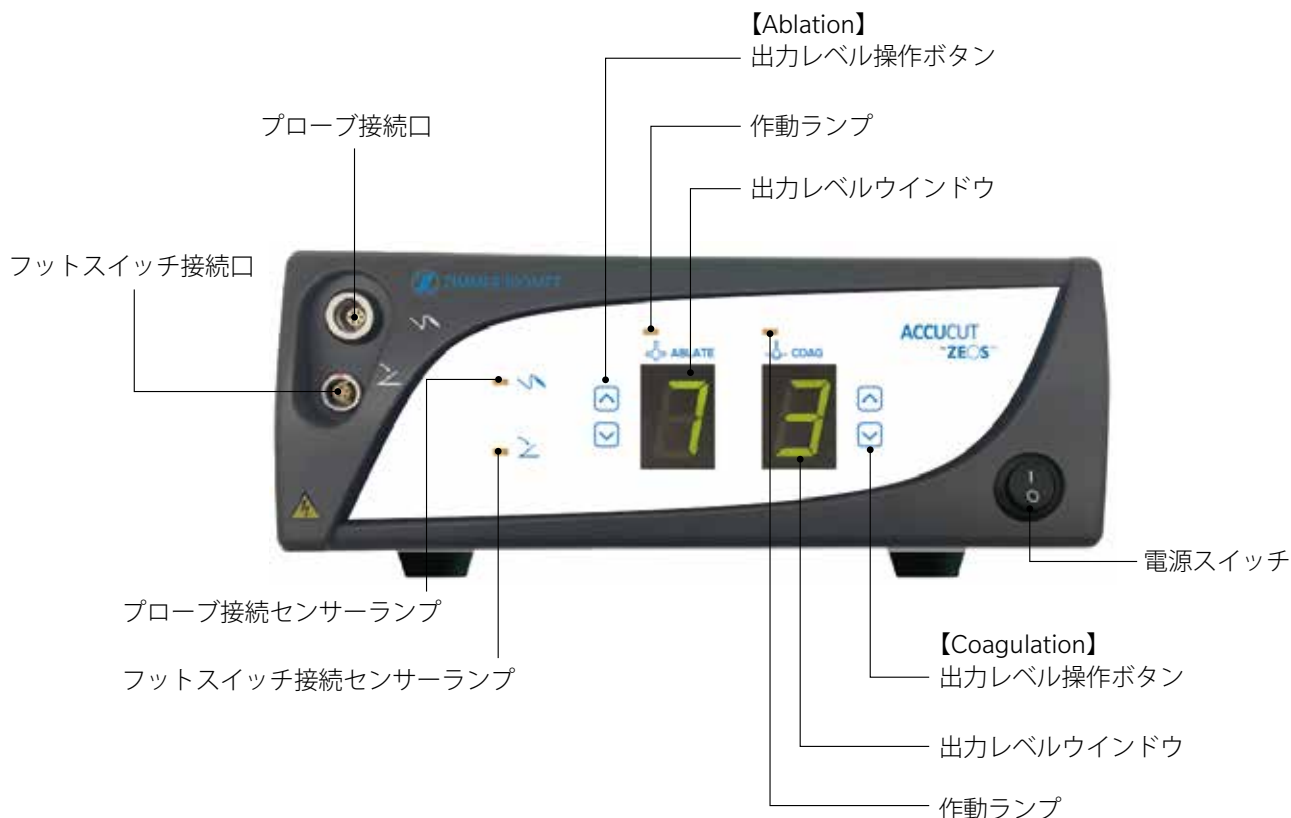

Ordering Information

コンソール

カタログ No.	品 名
----------	-----

84400108

ZEOS ACCUCUT RF コンソール (フットスイッチ付)

販売名：ACCUCUT RADIO FREQUENCY PLASMA SURGICAL システム
医療機器製造販売認証番号：303ADBZX00020000

プローブ

規格	先端形状	カタログ No.		推奨設定値		推奨使用部位		
		6 ピン	18 ピン (compatible 品)	Ablation	Coaguration	膝	肩	小関節
90°		84400109	84400114	7 - 9	4 - 6	◎	◎	
75°		84400110	84400115	7 - 9	4 - 6	○	○	
カーブ		84400111	84400116	7 - 9	4 - 6	○	○	
ベベル		84400112	84400117	6 - 8	—	○	○	○
フック		84400113	84400118	7 - 9	—	○ (半月板)	○	○

※ ZEOS ACCUCUT RF コンソールには 6 ピンのプローブを使用してください。

販売名：ACCUCUT RADIO FREQUENCY PLASMA SURGICAL システム
医療機器製造販売認証番号：303ADBZX00020000



ZIMMER BIOMET

Your progress. Our promise.®

ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階

Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620

<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

● カスタマーサービス (商品のご注文) Tel. 0463-30-4801

Fax. 0463-30-4821

● 製品のお問合せ Tel. 03-6402-6619

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡