

NCB[®] Periprosthetic Trochanter Plate

NCB PP大転子固定用プレート



NCB Periprosthetic Trochanter プレート

NCB 人工関節周囲プレートシステムの Trochanter プレートは、同システムの大腿骨近位用プレートと連結して使用できる大転子固定用プレートです。

ヘックスボタンホール

ヘックスボタンを用いてケーブル固定が可能



3.5mm スクリューホール

Ti ULS の 3.5mm スクリュー（ロッキング、またはコーティカル）が使用可能



NCB スクリュー用 クリアランスホール

NCB スクリュー＋ロッキングナットによる固定、またはケーブルボタンを用いたケーブル固定が可能



Kワイヤー用 クリアランスホール

プレートの仮固定用

コネクションスクリューホール

コネクションスクリューを用いてプレートを連結する際に使用



コネクションスクリュー

ケーブルボタン



楕円ホール

仮固定に使用可能（大腿骨近位用プレート／ショートのみ）



使用方法／手技ハイライト

※ Trochanter プレート以外の使用方法／手技については、大腿骨用 NCB 人工関節周囲プレートシステム手技書を参照してください。また 3.5mm スクリューの詳細については、Ti-Universal Locking System 手技書を参照してください。

プレートの連結

Trochanter プレートを使用する際は、体内に挿入する前に連結しておきます。2 本のコネクションスクリューが Trochanter プレートに同梱されています。トルクスクリュードライバー 6NM を用いて、Trochanter プレートと大腿骨近位用プレートを連結します。

⚠ 注意： Trochanter プレートを使用する際は、大腿骨近位用プレートの MIS インターフェイス（9~18 穴プレート）または楕円ホール（ショートプレート）より近位でプレートをバンドしないでください。プレートの連結ができなくなるおそれがあります。



⚠ 注意： Trochanter プレートをバンドしないでください。

Trochanter プレートへの 3.5mm Ti-ULS スクリューの挿入

1. 最近位にある 2 つのスクリューホールのどちらかに 3.5mm スクリュー（ロッキングまたはコーティカル）を挿入します
2. 隣のホールに同様にスクリューを挿入します
3. 必要に応じて、前方または後方にスクリューを挿入し、骨折部近傍に追加のスクリューを挿入します

⚠ 注意： Trochanter プレートのクリアランスホールでヘックスボタンを使用しないでください。ケーブルを使用する場合は、必ずケーブルボタンを使用してください。誤った使用方法によってボタンが脱転し、再骨折や骨を損傷するおそれがあります。

⚠ 注意： Trochanter プレートと大腿骨近位用プレートのショートサイズは単独で使うことができません。Trochanter プレートを使用する際は、必ずいずれかのサイズの大腿骨近位用プレートと組み合わせて使用してください。

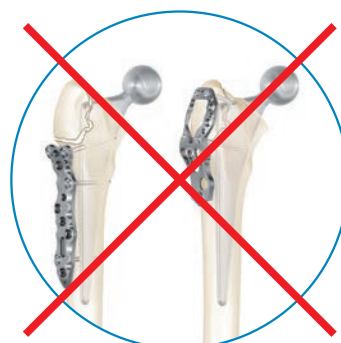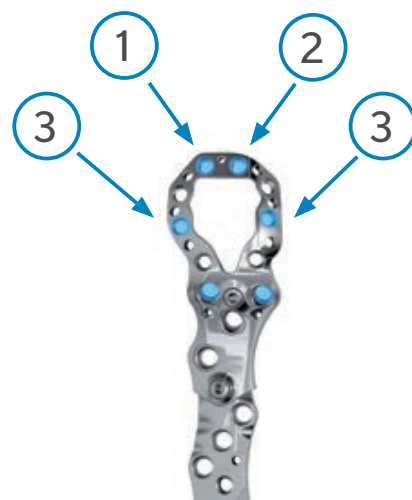

インプラント一覧

NCB PP Trochanter プレート

カタログ No.	
右	左
02.02263.201	02.02263.301



NCB PP コネクションスクリュー

カタログ No.
02.02266.002



Ti-ULS 3.5mm スクリュー※

カタログ No.	商品名	長さ
47-2369-0XX-35	3.5mm ロッキング	12 ~ 50mm (2mm 毎)
47-4935-0XX-01	3.5mm コーティカル	10 ~ 40mm (2mm 毎)

□オプションです。



NCB PP 大腿骨近位用プレート

カタログ No.		規格	長さ
右	左		
02.02263.000	02.02263.100	ショート	115mm
02.02263.009	02.02263.109	9 穴	245mm
02.02263.012	02.02263.112	12 穴	285mm
02.02263.015	02.02263.115	15 穴	324mm
02.02263.018	02.02263.118	18 穴	363mm

□オプションです。



販売名：NCB Periprosthetic Femur プレート
医療機器製造販売承認番号：22500BZX00506000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用プレート（体内固定用ネジ、体内固定用ケーブル）
機能区分：固定用内副子・FE-1
固定用内副子・FA-1、金属線・F6-b

※販売名：Ti ユニバーサルロッキングシステム（滅菌）
医療機器製造販売承認番号：22600BZX00443000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用ネジ
機能区分：固定用内副子・FA-1

本資料にて示された情報の全てにおける著作権、商標権、及びその他の知的財産権は、特に断りのない限り適宜 Zimmer Biomet 及びその支社に帰属し、これらの全てまたは一部を Zimmer Biomet の書面による許諾なしに再利用、複製、及び公開することはできません。また、こちらで提供された情報は、外科医の皆様が本来受けられる総合的なトレーニングに置き換わるものではありません。個々の症例に対する手技は、外科医の皆様の医学的判断の基で選択されなければなりません。治療結果は、患者様の健康状態、体重、活動状況など様々な要因に左右されます。したがって、すべての患者様が必ずしもこの製品あるいは手技の適応とはなりません。【禁忌・禁止】、【使用目的又は効果】、【使用上の注意】、及び不具合・有害事象等の情報については、本製品の添付文書をご参照いただくか、弊社営業担当者までご連絡ください。製品のさらなる最新の情報は、<https://www.zimmerbiomet.jp/ja> にてご確認ください。



ジンマー バイオメット

本社 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー12階
<https://www.zimmerbiomet.jp/ja>
カスタマーサービス Tel: 03-6700-1071 Fax: 0463-30-4821