Delfi PTSii Tourniquet System

デルファイ　ピーティーエスツー　タニケットシステム

iNDEPENDENCE & iNTELLIGENCE



ZIMMER BIOMET

Delfi PTSii Tourniquet System

INNOVATION TO SURGERY

PTS ii は小型で持ち運び自在な電動式タニケットシステムです。片手に乗るコンパクトなサイズは、オペ室の貴重なスペース確保に貢献します。
PTS ii は、ジンマー バイオメットの従来のシングルポート式タニケットカフと互換性があり、組み合わせて使用可能です。



直感的に操作できる ユーザーインターフェース

フルカラータッチパネルを搭載し、シンプルで直感的な操作で使用可能です。

進化したセーフティ機能

カフ圧と操作時間を大きくはっきりと表示するほか、機器本体がセルフテストとキャリブレーションを実施し、異常時にはランプと音でお知らせします。
また、予期しないカフ外れを防止するため、本体とホースの確実な接続を維持する CPC コネクターを使用しています。

圧力設定セーフティ機能 （インターロックシステム）

高いカフ圧を設定する場合に安全機能としてインターロックシステムが作動します。これはカフ圧を 475 mmHg 以上に設定しようとした場合に、一度制限を設けて確認する機能です。医師の指示確認のもと、患者様にとって必要な場合には、600 mmHg まで設定することができます。これにより、誤って高い圧力を設定するリスクの回避を期待できます。

Delfi PTSii Tourniquet System

INNOVATIVE EXCELLENCE AND INTELLIGENT FEATURES

長い内蔵電池寿命

最長 10 時間の内蔵電池による操作が可能です。

* 基本的には電源に接続した状態でご使用ください。

カフ空気漏れテスト機能を搭載

米国周手術期看護師協会（AORN）のガイドラインで推奨されている、術前・術後のカフの状態・空気漏れ検査が可能なカフ空気漏れテスト機能を搭載しています。

手術中のカフ空気漏れ検出機能を搭載

手術中のカフ、カフホース、コネクタ部からの空気漏れの異常を常時モニタリングし、異常時にはランプと音でお知らせします。

製品仕様

高さ：180 mm（7.0 インチ）　　幅：120 mm（4.7 インチ）
奥行：110 mm（4.3 インチ）　　重量：1.26 kg（44.5 オンス）
カフ圧範囲：20 - 600 mmHg、1 mmHg 単位
圧力精度：± 2mmHg
時間アラーム設定値範囲：5 - 240 分、1 分単位
加圧速度：30 インチ（76cm）の大腿部に 34 インチ（86cm）のカフを巻いた場合、
5 秒未満で 350 mmHg まで加圧します。
脱気速度：30 インチ（76cm）の大腿部に 34 インチ（86cm）のカフを巻いた場合、
10 秒未満で 10 mmHg 未満まで脱気します。



Ordering Information

カタログ No.	品　名	規　格
60-1000-101-00	Delfi PTSii タニケットシステム	カフ接続ホース（白）、電源アダプター、電源コード 各 1 本つき、ブラケット

付属品

カタログ No.	品　名	規　格
60-1000-212-00	カフ接続ホース（白）	長さ：3.4m、ルアーロック用アダプター付き

販売名：Delfi PTSii タニケットシステム
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0010
規制区分：一般医療機器
一般的名称：止血器

リユーザブルカフ

シングルポート、シングルカフ(A.T.S750, PTSii用)

カタログ No.	品　名	仕様	リボン色	入数
60-7600-001-00	20cm インフラ/ATS750 シングル カフ	82(W) X 200(L)	白	1個
60-7600-002-00	30cm インフラ/ATS750 シングル カフ	107(W) X 310(L)	水色	1個
60-7600-003-00	46cm インフラ/ATS750 シングル カフ	107(W) X 460(L)	赤	1個
60-7600-004-00	61cm インフラ/ATS750 シングル カフ	107(W) X 610(L)	緑	1個
60-7600-005-00	76cm インフラ/ATS750 シングル カフ	107(W) X 760(L)	青	1個
60-7600-006-00	86cm インフラ/ATS750 シングル カフ	107(W) X 860(L)	茶	1個
60-7600-007-00	107cm インフラ/ATS750 シングル カフ	107(W) X 1,070(L)	エンジ	1個
60-8000-001-00	エクストラ スモール アダルト カフ	76(W) X 378(L)	黄	1個
60-8000-002-00	スモール アダルト カフ	89(W) X 450(L)	灰	1個

販売名：ATS750 タニケットシステム
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0004
規制区分：一般医療機器
一般的名称：止血器

ディスポーザブルカフ

シングルポート、シングルカフ、スリーブなし（A.T.S.750,PTSii用）

カタログ No.	品　名	仕様	リボン色	スリーブ	滅菌	使用回数	入数
60-7075-101-00	20cmシングルポートディスポカフ	70（W）X 222（L）	白	なし	滅菌済み	単回使用	1箱 10個入り
60-7075-102-00	30cmシングルポートディスポカフ	105（W）X 324（L）	水色				
60-7075-103-00	46cmシングルポートディスポカフ	105（W）X 479（L）	赤				
60-7075-104-00	61cmシングルポートディスポカフ	105（W）X 635（L）	緑				
60-7075-105-00	76cmシングルポートディスポカフ	105（W）X 784（L）	青				
60-7075-106-00	86cmシングルポートディスポカフ	105（W）X 891（L）	茶				
60-7075-107-00	107cmシングルポートディスポカフ	105（W）X 1092（L）	エンジ				


シングルポート、シングルカフ、スリーブ付（A.T.S.750, PTSii用）

60-7075-152-00	30cmシングルポートディスポカフW/S	105（W）X 324（L）	水色	スリーブ付	滅菌済み	単回使用	1箱 10個入り
60-7075-153-00	46cmシングルポートディスポカフW/S	105（W）X 479（L）	赤				
60-7075-154-00	61cmシングルポートディスポカフW/S	105（W）X 635（L）	緑				
60-7075-155-00	76cmシングルポートディスポカフW/S	105（W）X 784（L）	青				
60-7075-156-00	86cmシングルポートディスポカフW/S	105（W）X 891（L）	茶				
60-7075-157-00	107cmシングルポートディスポカフW/S	105（W）X 1092（L）	エンジ				

延長ホース

カタログ No.	品　名	滅菌	使用回数	入数
60-4009-101-00	シングルエクステンションホース　W/ポジティブロッキングコネクター	滅菌済み	単回使用	1箱20個入り

販売名：滅菌済みカフ
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0011
規制区分：一般医療機器
一般的名称：再使用可能な止血帯

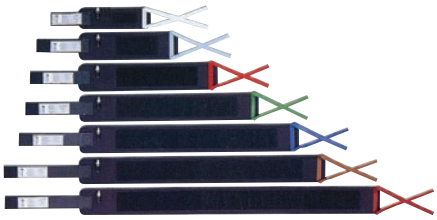

リユーザブルカフ



ディスポーザブルカフ

カタログ記載内容は、カタログ作成時点の内容に基づいています。製品の在庫や販売状況に関しては、下記までお問合せください。

ZIMMER BIOMET

ジンマー バイオメット
本社 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー12階
https://www.zimmerbiomet.jp/ja
カスタマーサービス　Tel: 03-6700-1071　Fax: 0463-30-4821

© 2026 Zimmer Biomet G.K.