

Zimmer® Pulsavac® Plus Wound Debridement System

パルス式洗浄器パルサバックプラス



Superior Options for Maximum Control

zimmer

Personal Fit. Renewed Life.

「パルサバックプラス」は、整形外科手術での使いやすさを追求し、多様な洗浄スタイルのチップを装備したパルス式洗浄器です。

人間工学に基づく軽量で握りやすいデザインに、操作性の良い水圧スイッチを搭載した、電池駆動式の単回使用のパルス式洗浄器です。
骨にはパワフルに、軟部組織には優しい水圧で、デブリの除去や感染防止のための洗浄を行います。



① ロッキングリングでチップをしっかり固定

リング部がチップをしっかりとロック固定します。

② 凹凸面がしっかりと手になじみ持ちやすく

縦型に持ったときにもグリップ機能で持ちやすい構造です。

③ 2種類の水圧スイッチ

高圧(Hi)と低圧(Low)の2種類の水圧選択操作が指1本で手軽にできます。
骨や軟骨組織の洗浄の使い分けが手元の操作のみで容易にできます。

④ 凹凸のついたピストル型ハンドル

凹凸面により滑りにくく、手のひらでしっかりと握れる構造です。

⑤ 人間工学に基づく軽量型デザイン

握り部が縦でも横でもしっかりと手のひらにフィットする構造です。

⑥ 単独型の噴射・吸引で同時作業が可能

洗浄用(A)と吸引用(B)にチューブが分かれ、噴射と吸引が同時に行えます。





用途にあったオプションチップ

人工股関節置換術や人工膝関節置換術など用途に応じたチップを８種類の中から選べます。



00-5150-155-01 スモールチップシールド付

ピンポイントのシングル噴射により高圧洗浄。
関節手術に。



00-5150-183-01 髄腔用チップブラシ付

360° 噴射パターン。ブラッシングしながら
洗浄・吸引。股関節手術に。



00-5150-175-01 ファンスプレーチップシールド付

関節手術や救急手術に。軟部組織へも対応。
ワイドな噴射パターン。



00-5150-184-01 ヒップリビジョンチップ

フィルターで破片をブロックし、チューブのつまりを防ぐ。再置換術にはもちろん、初回股関節手術にも。



00-5150-195-01 シャワースプレーチップシールド付

関節手術や救急手術に。軟部組織に対応。
ソフトな噴射パターン。



00-5150-185-01 髄腔用チップロング

４穴噴射で、髄腔壁を広く噴射。
股関節、膝関節手術に。



00-5150-181-01 髄腔用チップレギュラー

４穴噴射で、髄腔壁を洗浄。
股関節、膝関節手術に。幅広タイプ。



00-5150-182-01 髄腔用チップスモールステム用

360° 噴射パターン。狭い髄腔用の幅狭タイプ。
股関節手術に。





本体キットは、４種類

本体とバッテリーが入った基本キットです。用途に応じて４種類からお選びください。

- コンポーネントキット（チップ含まず）
- ファンスプレーキット（ファンスプレーチップシールド付）
- ヒップキット（ファンスプレーチップシールド付 / 髄腔用チップスモールステム用）
- シャワースプレーキット（シャワースプレーチップシールド付）

Ordering Information

Kit Pocks

カタログNo	品 名	規 格
00-5150-420-01	コンポーネントキット	チップなし
00-5150-475-01	ファンスプレーキット	ファンスプレーチップシールド付含む
00-5150-482-01	ヒップキット	ファンスプレーチップシールド付／髄腔用チップスモールステム用含む
00-5150-495-01	シャワースプレーキット	シャワースプレーチップシールド付含む

Multi-Orifice Tips

カタログNo	品 名
00-5150-175-01	ファンスプレーチップシールド付
00-5150-195-01	シャワースプレーチップシールド付

Debridement/Suction Tips

カタログNo	品 名
00-5150-155-01	スモールチップシールド付


Femoral Tips

カタログNo	品 名
00-5150-181-01	髄腔用チップレギュラー
00-5150-182-01	髄腔用チップスモールステム用
00-5150-183-01	髄腔用チップブラシ付
00-5150-184-01	ヒップリビジョンチップ
00-5150-185-01	髄腔用チップロング

Connector

カタログNo	品 名
00-5150-042-00	デュアルスパイクYコネクター

使用時セット方法例

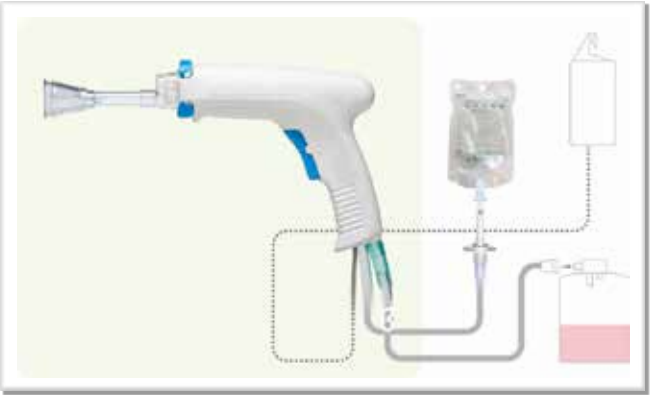

廃棄時の注意

使用後廃棄する際は、電池が入ったまま、電池パックのケーブルを絶対に切断しないでください。電池が入ったままケーブルを切断すると、感電、発熱、発火などの恐れがあります。
電池パックを液体に浸さないでください。
電池はアルカリ乾電池です。電池の取り外しには帯電防止のためゴムの手袋と防護メガネをして対応してください。
廃棄は地域の環境、ご施設の指定廃棄環境に基づいて廃棄してください。

販売名：パルサバックプラス
医療機器製造販売認証番号：226ADBZX00162000

ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

ジンマー バイオメット
本社〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600（代表） Fax. 03-6402-6620
http://www.zimmerbiomet.com/ja

- カスタマーサービス（商品のご注文）…… Tel. 0550-89-8522 Fax. 0120-89-3570
- 修理のお問合せ …… Tel. 0120-33-8507
- 製品のお問合せ …… Tel. 03-6402-6604

© 2016 Zimmer Biomet G.K.
ZJ-238-8（E） 5/2016 PulsaVacプラス カタログ〔97-5150-405-00〕