Skin Grafting Family

The Power of Precision



ZIMMER BIOMET

The Evolution of Precision

スキングラフト器機にはエアーのデルマトーム、メッシャーにはスキングラフトメッシャーとメッシュグラフトⅡの各２タイプを用意し、正確な動作のための機能設計でスムーズな植皮に貢献します。

操作の正確性

スムーズな操作性により正確な剥離が期待できます。剥離する皮膚の厚さは目盛り付きダイアルで容易に選択できます。

使いやすさへの配慮

小型で左右いずれの手でも握ることができるため使いやすいです。小型ハンドピースで、自然に手にフィットし、手の疲労の軽減が期待されます。

簡単なお手入れ

シンプルメンテナンスで耐久性と利便性をご提供します。モーターは注油不要で、使用後は流水で簡単に洗浄可能です。プレバキューム式蒸気滅菌、重力置換式蒸気滅菌のどちらにも対応します。修理の際には代替機をご利用いただけます（有料）。





エアーデルマトーム

エアーデルマトーム

・軽量コンパクト、持ち手の細いハンドピース

精細な剥離調整

・0.002 インチ（0.05mm）刻みで 0.030 インチ（0.762mm）の厚さまで剥離可能
・1 インチ（2.5cm）刻みで 4 種類（2.5 ～ 10cm）のプレートによる採皮幅の選択が可能

日常のメンテナンス

・洗浄後オートクレーブによる滅菌処理が可能
（オートクレーブ用ケースが付属）
・すすぎ洗いしやすいデザイン
・国内のメンテナンスセンターで修理対応可能
（安全にご使用いただくために年 1 回の動作チェック（有料）を強くおすすめします。）

操作性と安全性への配慮

・誤作動防止の安全レバー
・滅菌ディスポーザブル替刃

エアーデルマトーム　（ハンドピース仕様）

カタログ No. 00-8801-001-00

材　質	ステンレススチール、アルミニウム
重　量	737g（ハンドピース）
スピード	4,000サイクル／分
全　長	21.6cm
幅	13.2cm
ハンドル長	10.0cm
ホース長	3m
操作圧	100PSI（7kg／cm^2）
窒素消費量	最大8CFM（226ℓ／毎分）
動力源	窒素ガス、医療用圧縮空気
最大剥離幅	10cm（2.5cm、5cm、7.5cm、10cmの4種類）
最大剥離厚	0.762mm（0.05mm刻みで変更可）

滅菌について
・ハンドピースとホースはオートクレーブで滅菌可能です。
・替刃は滅菌済ディスポーザブル製品です。再使用はしないで下さい。

メンテナンスについて
注油の必要はありません。ハンドピース・ワイズプレートの汚れは表面を洗浄後、流水によるすすぎ洗いを行って下さい。水や洗浄液には絶対に浸さないで下さい。洗浄後乾いたタオル等で水を良く拭いて下さい。正確な動作のために1 年に1 回の機器チェックをおすすめいたします。



スキングラフト
メッシャー


メッシュグラフトⅡ

ユーザーフレンドリー設計
シンプルな操作性でメッシュが可能です。メッシュグラフトⅡでは、倍率の異なるメッシュ板（キャリア）を差し込むことで倍率（4 種類：1.5 倍、3 倍、6 倍、9 倍）が変更可能です。スキングラフトメッシャーは二重ステンレス刃構造であり、替刃を入れ替えることでメッシュ倍率（4 種類：1.5 倍、2 倍、3 倍、4 倍）を変更できます。

スキングラフトメッシャー　（本体仕様）

カタログ No. 00-7701-000-00

構成内容	スキングラフトメッシャー本体、ラチェットハンドル、滅菌ケース
重　量	本体3.2kg、ハンドル0.4kg
サイズ	16.5（長さ）X18.4（幅）cm
付属品	ラチェットハンドル、滅菌ケース

※カッター（材質：コバルトクローム）は別売品

メッシュグラフトⅡ　（本体仕様）

カタログ No. 00-2195-001-00


構成内容	メッシュグラフトⅡ本体、ラチェットハンドル
重　量	5.1kg、ハンドル0.4kg
サイズ	25.1（長さ）X11.4（幅）cm
付属品	ラチェットハンドル

※滅菌ケースは別売品

スキングラフトキャリア（滅菌済み）スキングラフトメッシャー用

・拡大率は4種類（1.5倍、2倍、3倍、4倍）です。
・10X20cmと10X40cmの2種で、長い植皮片にも対応可能です。


皮片拡大後の大きさの例
スキングラフトキャリア4in.（10cm）幅使用時

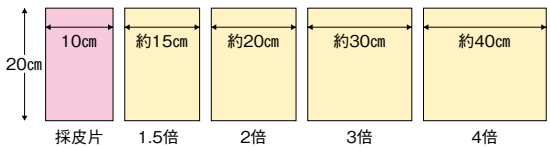

ダーマキャリアⅡ（滅菌済み）メッシュグラフトⅡ用

・拡大率は4種類（1.5倍、3倍、6倍、9倍）です。

皮片拡大後の大きさの例
デルマトームワイズプレート3in.（7.5cm）幅使用時

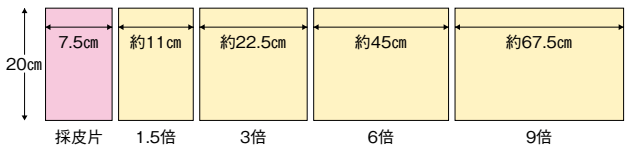

滅菌について　・本体・ラチェットハンドルともにオートクレーブで滅菌可能です。
・滅菌の前には流水によるすすぎ洗いを行って下さい。水や洗浄液には絶対に浸さないで下さい。洗浄後乾いたタオルで水を良く拭いて下さい。

Ordering Information



エアー デルマトーム

・3mホース、ワイズプレート、専用ドライバーはエアーハンドピース本体(00-8801-001-00)に含まれます。

カタログNo.	品　名
00-8801-001-00	エアーハンドピース本体
00-8801-003-00	滅菌ケース(材質:ステンレススチール)＊ サイズ:35.0(幅)X27.5(奥行)X7.5(高さ)cm
00-8800-000-10	替刃(滅菌済ディスポーザブル製品 10枚/箱)※

販売名：エアーデルマトーム
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0007
規制区分：一般医療機器
一般的名称：ガス圧式デルマトーム
※販売名：デルマトームブレード
医療機器製造販売認証番号：227ADBZX00121000
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用デルマトーム用刃
＊薬事法規対象外

・ワイズプレート、専用ドライバーはエアーハンドピース本体（00-8801-001-00)に含まれます。

ワイズプレート

(エアー、電動どちらのデルマトーム本体にもご使用いただけます。)

カタログNo.	品　名
00-8802-001-00	1インチ(2.5cm)
00-8802-002-00	2インチ(5.0cm)
00-8802-003-00	3インチ(7.5cm)
00-8802-004-00	4インチ(10cm)

販売名：エアーデルマトーム
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0007
規制区分：一般医療機器
一般的名称：ガス圧式デルマトーム
販売名：電動デルマトーム
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0008
規制区分：一般医療機器
一般的名称：デルマトーム



スキングラフトメッシャー

カタログNo.	品　名
00-7701-000-00	スキングラフトメッシャー
00-7701-003-00	滅菌ケース(材質:ステンレススチール)＊ サイズ:27.8(幅)X18.2(奥行)X7.8(高さ)cm
00-7701-022-00	ラチェットハンドル(材質:ステンレススチール)サイズ:21.3(長さ)X3.2(幅)cm
00-7703-015-00	カッター(拡大率 1.5倍)
00-7703-020-00	カッター(拡大率 2倍)
00-7703-030-00	カッター(拡大率 3倍)
00-7703-040-00	カッター(拡大率 4倍)
00-7708-000-10	スキングラフトキャリア (10X20cm)(10枚／箱)
00-7716-000-10	スキングラフトキャリア (10X40cm)(10枚／箱)

販売名：ジンマー・バイオメット スキングラフト メッシャー
医療機器製造販売認証番号：230ADBZX00079000
規制区分：管理医療機器
一般的名称：自家植皮拡張器
＊薬事法規対象外



メッシュグラフトⅡ

カタログNo.	品　名
00-2195-001-00	メッシュグラフトⅡ
00-2195-006-00	滅菌ケース(材質:ステンレススチール)＊ サイズ:27.8(幅)X18.2(奥行)X7.8(高さ)cm
00-2195-022-00	ラチェットハンドル(材質:ステンレススチール) サイズ:21.3(長さ)X3.2(幅)cm
00-2195-012-00	ダーマキャリアⅡ (拡大率 1.5倍)(20枚／箱)※
00-2195-013-00	ダーマキャリアⅡ (拡大率　3倍)(20枚／箱)※
00-2195-014-00	ダーマキャリアⅡ (拡大率　6倍)(20枚／箱)※
00-2195-015-00	ダーマキャリアⅡ (拡大率　9倍)(20枚／箱)※

販売名：メッシュグラフト Ⅱ デルマトーム
医療機器製造販売承認番号：15100BZY00842000
規制区分：管理医療機器
一般的名称：自家植皮拡張器
※販売名：ダーマキャリア Ⅱ
医療機器製造販売承認番号：20500BZY00093000
規制区分：管理医療機器
一般的名称：自家植皮拡張器
滅菌済ディスポーザブル製品
＊薬事法規対象外

本カタログの記載内容は作成時の情報に基づいています。製品の在庫や販売状況に関しては、下記までお問合せください。

ZIMMER BIOMET

ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600(代表) Fax. 03-6402-6620
https://www.zimmerbiomet.com/ja

● カスタマーサービス(商品のご注文)…… Tel.03-6700-1071
Fax.0463-30-4821
● 修理のお問合せ …… Tel.0463-30-4805
● 製品のお問合せ …… Tel.03-6402-6604

SurgicalEquipment.Japan@zimmerbiomet.com

営業拠点:札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡

© 2024 Zimmer Biomet G.K.

ZJ-494-6(E) 6/2024 Dermatome Skin Grafting Systemカタログ〔0059.1-US-en-REV0915〕