

SternaLock Blu

Primary Closure System




THORACIC

プレート


ロッキングプレート

- ・スクリュー先端が対側皮質を保持し、スクリューヘッドがプレートにロッキングされるデザイン
- ・スクリューがプレートにロックされるため、締め過ぎによる骨組織の損傷を防ぐ

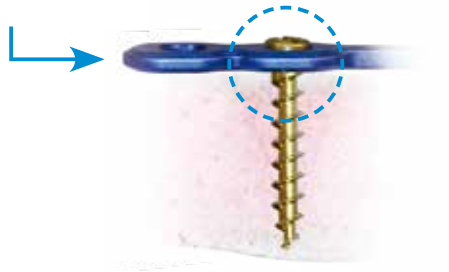

ロープロファイルデザイン


- ・プレート厚み：1.6mm
- ・ラウンドシェイプデザイン
- ・表裏のないリバーシブルプレート
- ・容易なベンディング

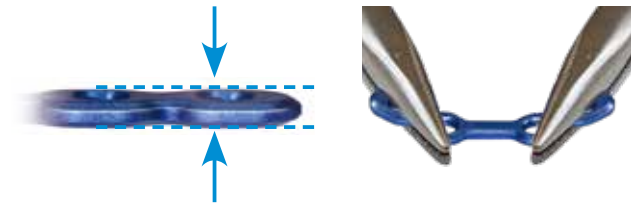

スクリュー

セルフドリリングスクリュー

- ・下穴不要で骨へダイレクトに挿入可能なデザイン

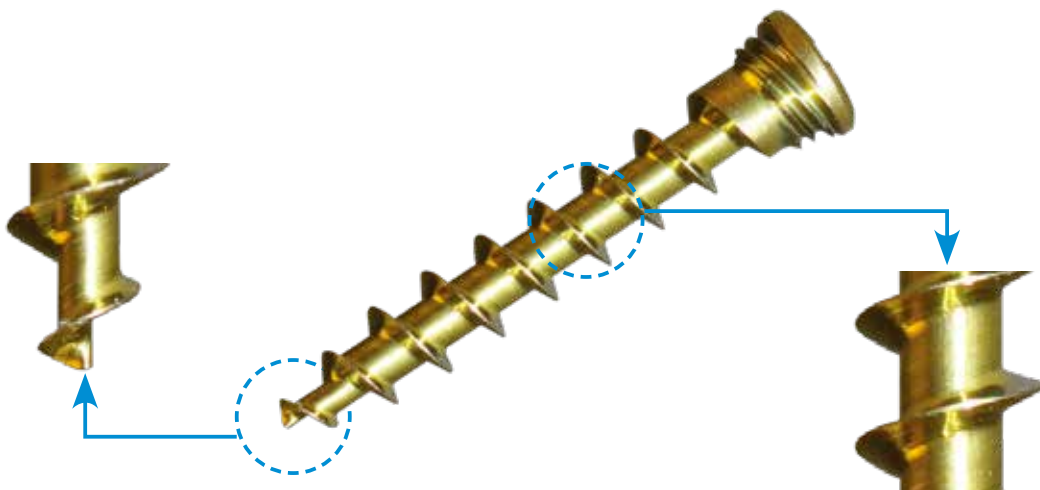

スクリュー仕様

- ・ピッチ幅：1.6mm
- ・内径：1.3mm、外径：2.4mm

キャンセラススクリュー

- ・海綿骨内における骨把持力を最適化するディープスクリュースレッドデザイン


インプラント プレート




L型 100° 4穴
73-2643




スクエア型 4穴
73-2622

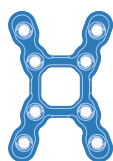


X型 8穴
73-2623

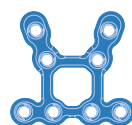

JL型 8穴
73-2645

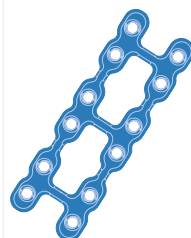

ラダー型 12穴
73-2632

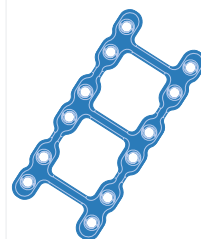

ワイドラダー型 12穴
73-2634

スクリュー

セルフドリリングロックング スクリュー



品番

規格

73-2408	2.4mm x 8 mm
73-2410	2.4mm x 10mm
73-2412	2.4mm x 12mm
73-2414	2.4mm x 14mm
73-2416	2.4mm x 16mm
73-2418	2.4mm x 18mm
73-2420	2.4mm x 20mm

エマージェンシー スクリュー



品番

規格

73-2708	2.7mm x 8 mm
73-2710	2.7mm x 10mm
73-2712	2.7mm x 12mm
73-2714	2.7mm x 14mm
73-2716	2.7mm x 16mm
73-2718	2.7mm x 18mm
73-2720	2.7mm x 20mm

インスツルメント



販売名：SternaLock Blu システム
 医療機器製造販売承認番号：22400BZX00284000
 規制区分：高度管理医療機器
 一般的名称：体内固定用プレート（体内固定用ネジ）
 機能区分： 061 固定用内副子（プレート）（1）ストレートプレート（生体用合金 I・S）
 061 固定用内副子（プレート）（2）ストレートプレート（生体用合金 I・L）
 060 固定用内副子（スクリュー）（1）一般スクリュー（生体用合金 I）①標準型

販売名：ローレンツ骨手術用器械
 医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CT0027
 規制区分：一般医療機器

販売名：ワイヤーカッター
 医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CT0019
 規制区分：一般医療機器

販売名：パワードライバー
 医療機器製造販売承認番号：22000BZX01611000
 規制区分：管理医療機器



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
 Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス (商品のご注文) Tel.03-6700-1071
 Fax.0463-30-4821

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡