


A.L.P.S.[®] Clavicle Plating System

A.L.P.S.鎖骨用プレートシステム

製品カタログ

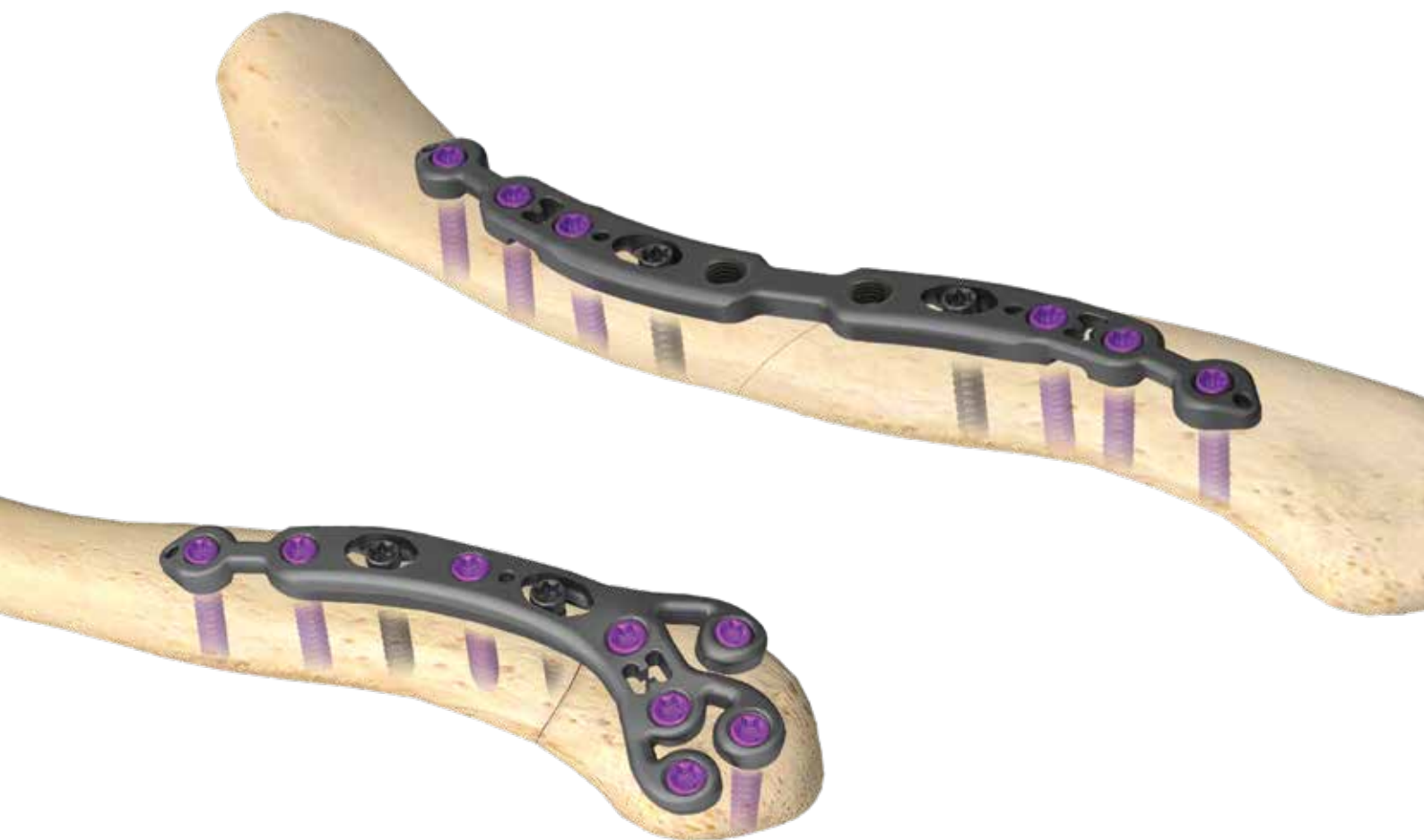

A.L.P.S. 鎖骨用プレートシステム

Tailored Fit - 個々の患者、症例に応じた適合性の向上

- さまざまな骨折型や術者の好みに応じて 3 種類のプレートから選択が可能。
- 各プレートは、解剖学的な適合性を向上させるために、骨形状のデータベースを基にデザインされており、またナローとスタンダードの 2 種類のサイズから選択することが可能。
- 直観的な骨への形状適合に加えて、術中のベンディングによって個別の骨形状に合わせた適合が得られるような柔軟性を備えたデザイン。

スーペリア（上方）プレート

サイズ：スタンダード（3.5 mm スクリュー） or ナロー（2.7 mm スクリュー）



アンテリア（前方）プレート

サイズ：スタンダード（3.5 mm スクリュー） or ナロー（2.7 mm スクリュー）



ディスタル（遠位）プレート

サイズ：スタンダード（3.5 mm スクリュー） or ナロー（2.7 mm スクリュー）



スタンダードプレート用スクリュー（T15 ヘッド）



3.5 mm コーティカルスクリュー ロッキング (カタログ No.8561350XX)



3.5 mm ノンロッキングスクリュー T15 (カタログ No.1100176XX)


ナロープレート用スクリュー（スクエアヘッド）




2.7 mm ロッキングスクリュー (カタログ No.1318271XX)



2.7 mm ノンロッキングスクリュー (カタログ No.1318272XX)

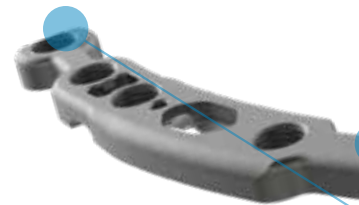

TiMAX 加工による疲労強度の向上^{※2}

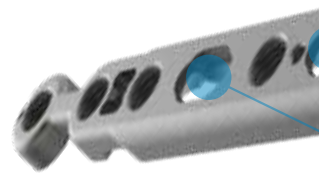

プレート中央の“くびれ形状”によって、専用のベンダーを用いたベンディングが容易※¹

皮下への挿入を容易にするプレート両側端の弾丸形状

楕円形のコンプレッションスロットを用いてプレート位置の微調整が可能

内外側に配置された K ワイヤーホールによる骨折の仮固定

ショートドリル

対側皮質を貫通した後の過度のドリリングを抑制し、軟部組織損傷リスクを低減します。

各プレート端のタブ部は、骨形状に適合させるために *in situ* ベンディングが可能（“F.A.S.T. TABS[®]” テクノロジー）

“ドッグボーン型” ホールデザインの採用。専用のベンダー（FAST グリップ）を用いることで同ホールに隣接するロッキングホール間のベンディングを容易に行うことができ、また K ワイヤーを用いた骨折の仮固定にも利用可能

ディスタルプレート遠位端の枝状部は、骨形状に適合させるために *in situ* ベンディングが可能

※ 1：プレート中央の“くびれ”部分では、FAST グリップによるベンディングはできません。

※ 2：316L ステンレススチールおよび Type1 陽極酸化加工を施したチタン合金との比較（社内試験 DVA-107504-DVER）。尚、機械的試験結果は必ずしも臨床上の効果を保証するものではありません。

スーペリアプレート（上方）

ナロープレート（2.7mm スクリュー用）

カタログ No.		プレート	長さ	外観（右用を例示）
右	左			
132012100	132022100	ALPS クラビクル ナロー スーペリア プレート 10 穴	100mm	

スタンダードプレート（3.5mm スクリュー用）

カタログ No.		プレート	長さ	外観（右用を例示）
右	左			
132015090	132025090	ALPS クラビクル スーペリア プレート 8 穴	90mm	
132015110	132025110	ALPS クラビクル スーペリア プレート 10 穴	110mm	
132015125	132025125	ALPS クラビクル スーペリア プレート 12 穴	125mm	

アンテリアプレート（前方）

ナロープレート（2.7mm スクリュー用）

カタログ No.（左右共通）	プレート	長さ	外観
132001090	ALPS クラビクル ナロー アンテリア プレート 11 穴	90mm	

スタンダードプレート（3.5mm スクリュー用）

カタログ No.（左右共通）	プレート	長さ	外観
132004100	ALPS クラビクル アンテリア プレート 9 穴	100mm	
132004120	ALPS クラビクル アンテリア プレート 11 穴	120mm	
132004140	ALPS クラビクル アンテリア プレート 13 穴	140mm	

ディスタルプレート（遠位）

ナロープレート（2.7mm スクリュー用）

カタログ No.		プレート	長さ	外観（右用を例示）
右	左			
132013055	132023055	ALPS クラビクル ナロー ディスタル プレート 9 穴	55mm	

スタンダードプレート（3.5mm スクリュー用）

カタログ No.		プレート	長さ	外観（右用を例示）
右	左			
132016080	132026080	ALPS クラビクル ディスタル プレート 10 穴	80mm	
132016120	132026120	ALPS クラビクル ディスタル プレート 13 穴	120mm	

☐ はオプション

販売名：ALPS クラビクルシステム
医療機器製造販売承認番号：304008ZX00165000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用プレート
機能区分：固定用内副子・FE-1

販売名：ALPS ディスタルフィブラシステム
医療機器製造販売承認番号：225008ZX00429000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用プレート（体内固定用ネジ）
機能区分：固定用内副子・FA-1
：固定用内副子・FE-1

販売名：DVRePAK システム
医療機器製造販売承認番号：226008ZX00384000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用プレート（体内固定用ネジ）
機能区分：固定用内副子・FA-1
：固定用内副子・FE-1



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600（代表） Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス（商品のご注文）…………… Tel.03-6700-1071
Fax.0463-30-4821

営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡