


A.L.P.S.[®] MIS LCプレートシステム

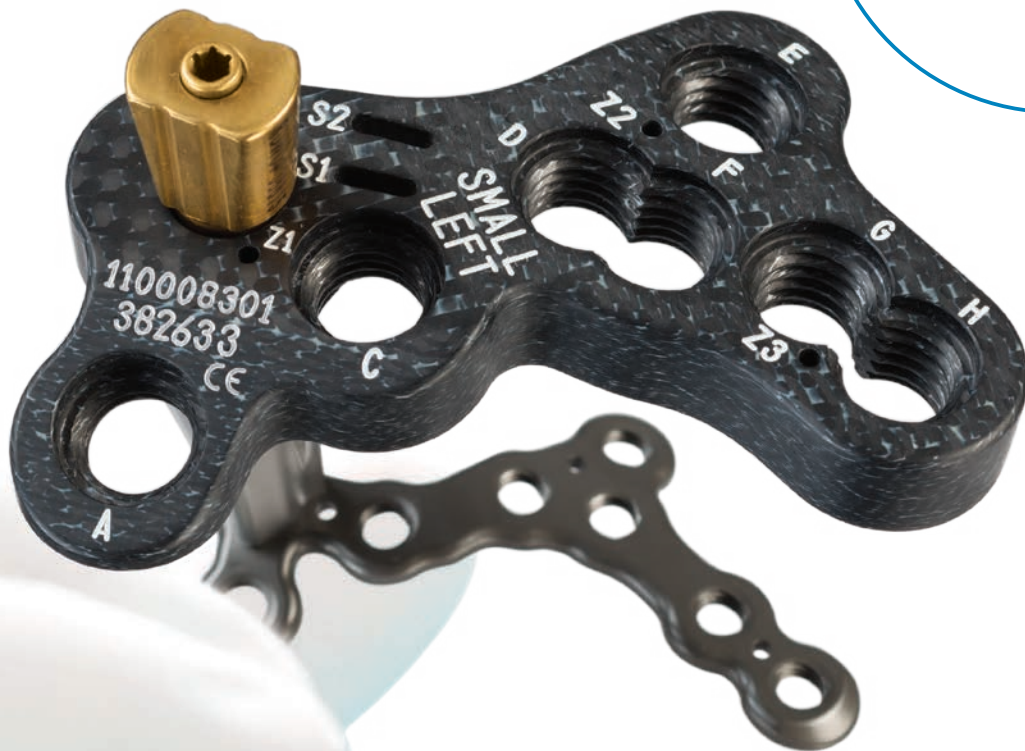

A.L.P.S. MIS LCプレートシステム

MIS LC プレートシステムは、様々な症例に対応する MIS (小侵襲) 踵骨骨折専用システムです。スタンダードプレートは距踵関節面のサポートに特化したデザインで、またエクステンションプレートは後方の固定が必要となる複雑な症例に対応できるようにデザインされています。さらにカーボンファイバー製の専用 MIS LC ジグは、より簡便な小侵襲手術をサポートします。

MIS LC プレート


- アナトミカルな形状
- ロープロファイルデザイン (2mm 厚)
- 豊富なサイズバリエーション
 - 左右別
 - スモール / ラージ
 - スタンダード / エクステンション



外側



内側

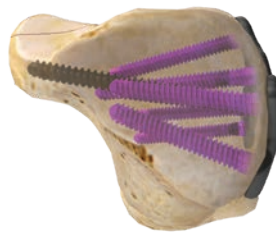

軸位 (Harris)



背側

※詳細はインプラント一覧のページをご参照ください

スクリュー

- プレートから突出しないロープロファイルヘッド
- 各スクリューホールにはロックング / ノンロックングスクリューの選択が可能



3.5 mm コーティカルスクリューロックング



3.5 mm ロープロファイルコーティカル (ノンロックング)



ロックングスクリュー




ロープロファイルスクリュー (ノンロックング)

MIS LC ジグ

- 容易なプレート挿入




- 透過性ジグ(カーボン製)による良好な視野

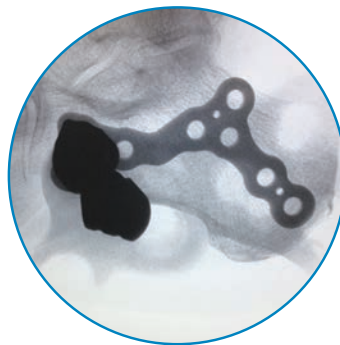

- スロットを利用したプレート位置の調整




高低の調整

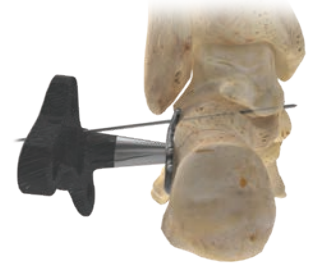

前後の調整

前方

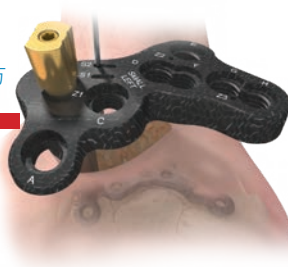

後方



インプラント一覧



カタログNo. 商品名

110016972 MIS LC プレート スモール レフト
110016973 MIS LC プレート スモール ライト



カタログNo. 商品名

110016974 MIS LC プレート ラージ レフト
110016975 MIS LC プレート ラージ ライト



カタログNo. 商品名

110016966 MIS LC スモール エクステンション 2 ホール レフト
110016967 MIS LC スモール エクステンション 2 ホール ライト



カタログNo. 商品名

110016968 MIS LC ラージ エクステンション 2 ホール レフト
110016969 MIS LC ラージ エクステンション 2 ホール ライト

3.5mm コーティカルスクリュー ロッキング



カタログNo. サイズ

8561350XX 10 ～ 60mm (2mm 毎)

ドリル径 2.7mm

★ T-15 テーパー ドライバー 使用

3.5mm ロープロファイル コーティカル (ノンロッキング)



カタログNo. サイズ

8512350XX 10 ～ 50mm (2mm 毎)

55 ～ 70mm (5mm 毎)

ドリル径 2.5mm

■ 2.2mm スクエア スクリュー ドライバー 使用



カタログNo. 商品名

110016970 MIS LC ラージ エクステンション 3 ホール レフト
110016971 MIS LC ラージ エクステンション 3 ホール ライト

販売名：ALPS フット&アンクル システム
医療機器製造販売承認番号：22600BZX00505000

規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用プレート
機能区分：固定用内副子・FE-1

販売名：ALPS ディスタルフィブラ システム
医療機器製造販売承認番号：22500BZX00429000

規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：体内固定用プレート (体内固定用ネジ)
機能区分：固定用内副子・FE-1
固定用内副子・FA-1

【禁忌・禁止】、【使用目的又は効果】、【使用上の注意】、及び不具合・有害事象等の情報については、本製品の添付文書をご参照いただくか、弊社営業担当者までご連絡ください。製品のさらなる最新の情報は、<https://www.zimmerbiomet.com/ja>にてご確認ください。



ジンマー バイオメット

本社 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー12階

<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

カスタマーサービス Tel: 03-6700-1071 Fax: 0463-30-4821