

# ANN Proximal Humeral System

ANN上腕骨近位用 髓内釘システム

製品カタログ



ZIMMER BIOMET

# ANN上腕骨近位用 髓内釘システム

ANN ヒューメラルシステムは、簡便で効率的な操作によって、幅広い症例に対応できる上腕骨用髓内釘システムです。




## CoreLock™ 機構

すべての近位スクリューをまとめて機械的にロックできる CoreLock™ 機構により、近位骨片に対する角度安定性を高めるとともに、術後にスクリューがバックアウトするリスクを低減しています。

## 三次元的に支持するスクリー配置

3本のトランスバーススクリー、APスクリー、打上げスクリーからなる近位スクリーによって、骨頭内を三次元的且つ広範に支持します。また、結節部の適切な固定を実現するために左右別のネイルデザインを採用しています。

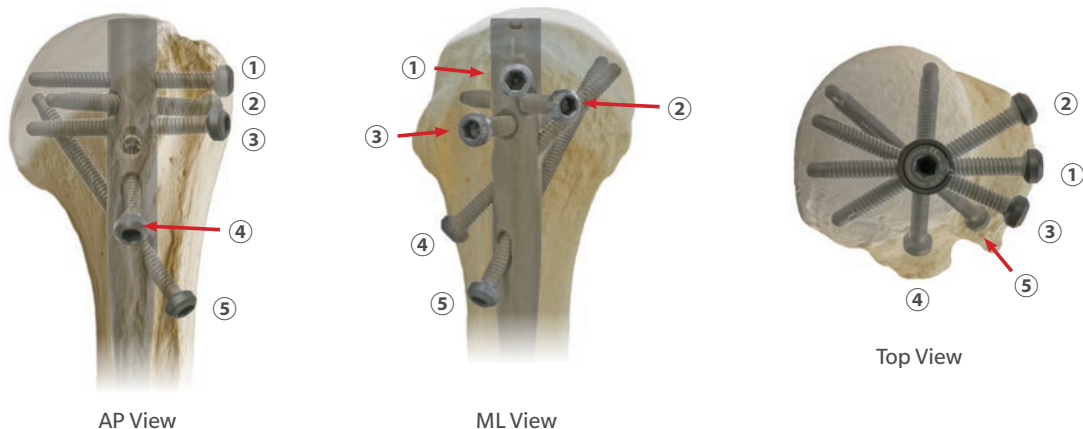


## 様々な固定オプション

挿入方向を選択可能な近位スクリー、近位骨片の固定を補助するワッシャー、アンカリング効果を活かすためのエンドキャップ、遠位寄りの骨折に対応するためのロングネイル、豊富なネイル遠位径のバリエーションなどによって、幅広い症例に対応が可能です。



## 簡便で効率的な手術器械

ジグやスリーブ類などの主要な手術器械は、使用する部位などによってカラーコーディングされており、それらは器械ケース内に手順に沿ってわかりやすく配置されています。

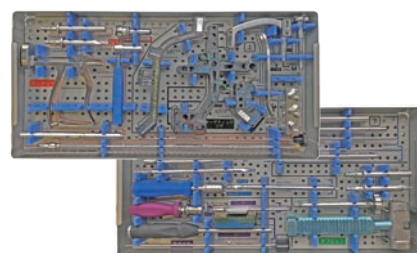

# インプラント一覧

## ANN プロキシマルヒューメラル

| ネイル径 | カタログ No.       |                | 長さ   |
|------|----------------|----------------|------|
|      | 右              | 左              |      |
| 7mm  | 47-2496-160-07 | 47-2496-161-07 | 16cm |
| 9mm  | 47-2496-160-09 | 47-2496-161-09 |      |
| 11mm | 47-2496-160-11 | 47-2496-161-11 |      |

## ANN プロキシマルヒューメラル ロング

| ネイル径  | カタログ No.       |                | 長さ                |      |
|-------|----------------|----------------|-------------------|------|
|       | 右              | 左              |                   |      |
| 7mm   | 47-2496-XX0-07 | 47-2496-XX1-07 | 20 ～ 26cm (2cm 毎) | 28cm |
| 8.5mm | 47-2496-XX0-08 | 47-2496-XX1-08 | 20 ～ 26cm (2cm 毎) | 28cm |
| 10mm  | 47-2496-XX0-09 | 47-2496-XX1-09 | 20 ～ 26cm (2cm 毎) | 28cm |

## 4.0mm ANN プラントティップスクリュー (近位用)


| カタログ No.       | 長さ                |
|----------------|-------------------|
| 47-2486-0XX-40 | 34 ～ 60mm (2mm 毎) |
|                | 60 ～ 70mm (5mm 毎) |
|                | 75mm, 80mm        |

## 4.0mm ANN コーティカルスクリュー (遠位用)

| カタログ No.       | 長さ                |
|----------------|-------------------|
| 47-2486-1XX-40 | 22 ～ 34mm (2mm 毎) |
|                | 36mm, 38mm, 40mm  |

## ANN ワッシャー

| カタログ No.       |       |
|----------------|-------|
| 47-2488-000-04 | スモール  |
| 47-2488-000-05 | スパイダー |

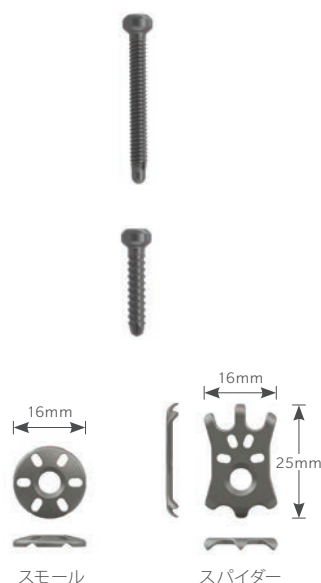

## ANN PH エンドキャップ

| カタログ No.       | 長さ    |
|----------------|-------|
| 47-2488-010-00 | 0mm   |
| 47-2488-010-02 | 2.5mm |
| 47-2488-010-05 | 5mm   |
| 47-2488-010-07 | 7.5mm |



## ANN PH エンドキャップ (ネイル径 11mm 用)

| カタログ No.       | 長さ    |
|----------------|-------|
| 47-2488-011-02 | 2.5mm |
| 47-2488-011-05 | 5mm   |
| 47-2488-011-07 | 7.5mm |

■ はオプション

販売名：ANN ヒューメラルシステム  
 医療機器製造販売承認番号：30100BZX00105000  
 規制区分：高度管理医療機器  
 一般的名称：体内固定用上肢髓内釘、体内固定用ネジ、体内固定用ワッシャー  
 機能区分：髓内釘・F4-a、髓内釘・F4-h-1、固定用内副子・FK-2

【禁忌・禁止】、【使用目的又は効果】、【使用上の注意】、及び不具合・有害事象等の情報については、本製品の添付文書をご参照いただくか、弊社営業担当者までご連絡ください。製品のさらなる最新の情報は、<https://www.zimmerbiomet.com/ja> にてご確認ください。



## ジンマー バイオメット

本社 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー12階

<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

カスタマーサービス Tel: 03-6700-1071 Fax: 0463-30-4821