



Avitus[®] Bone Harvester


Avitus ボーンハーベスター

製品カタログ


Avitus[®] Bone Harvester

Avitus[®] ボーンハーベスターは、吸引装置を用いて自家骨採取を行うディスポーザブルデバイスです。低侵襲かつ短時間で、海綿骨と骨髓液を同時に採取することが可能です。

自家骨移植

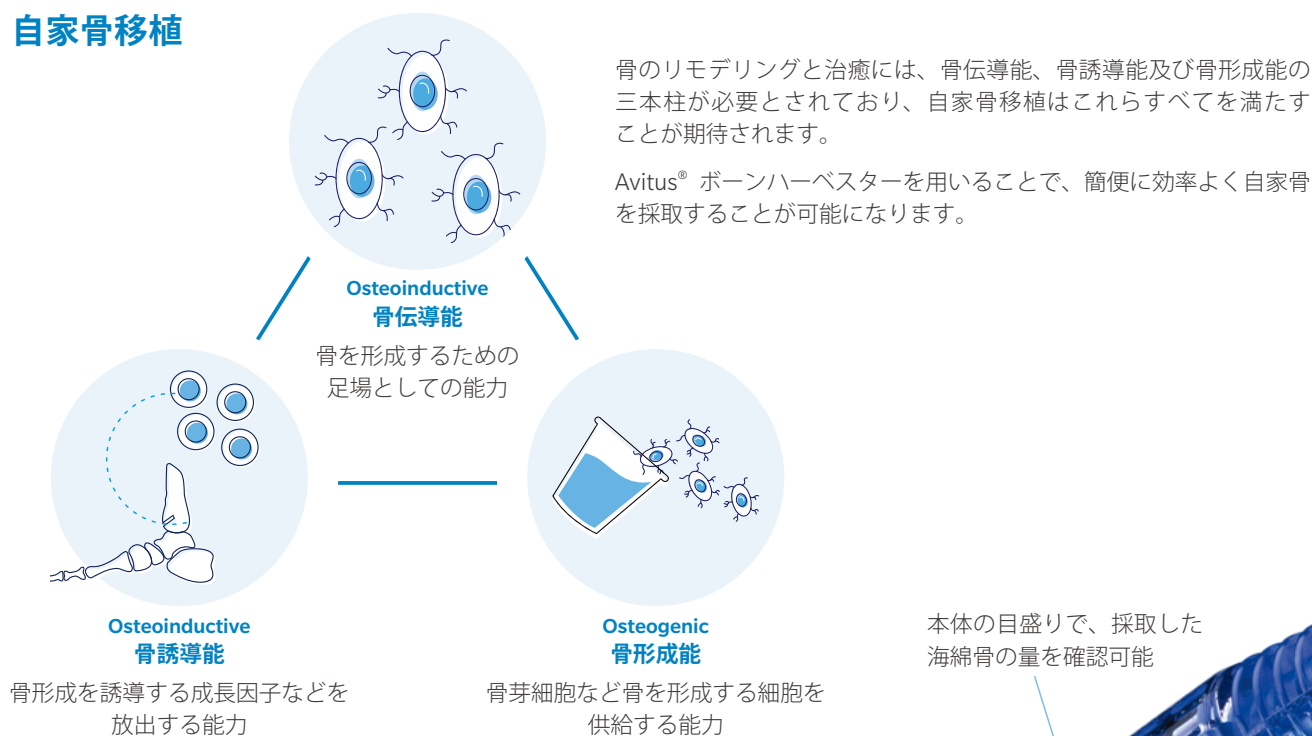

主な採取部位（下肢の例）

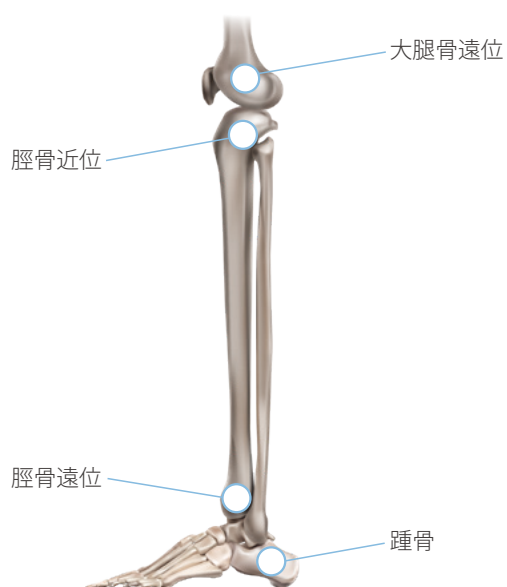


その他の採取部位：尺骨近位、橈骨遠位等




鋭匙状のカッティングチップによって効率的に骨を採取可能



採取量／採取部位に応じて2サイズから選択可能（6 mm または 8 mm）

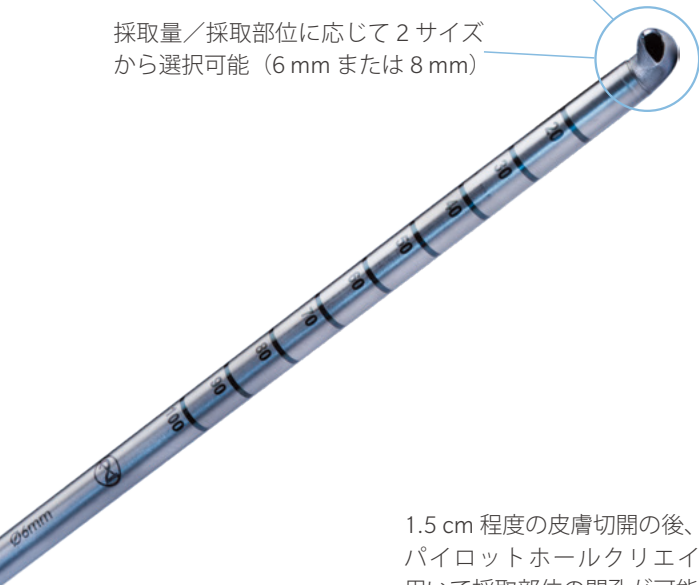

ボーンハーベスターの滅菌パッケージには、採取した海绵骨を無駄なく取り出すためのプランジャーとヘラを同梱

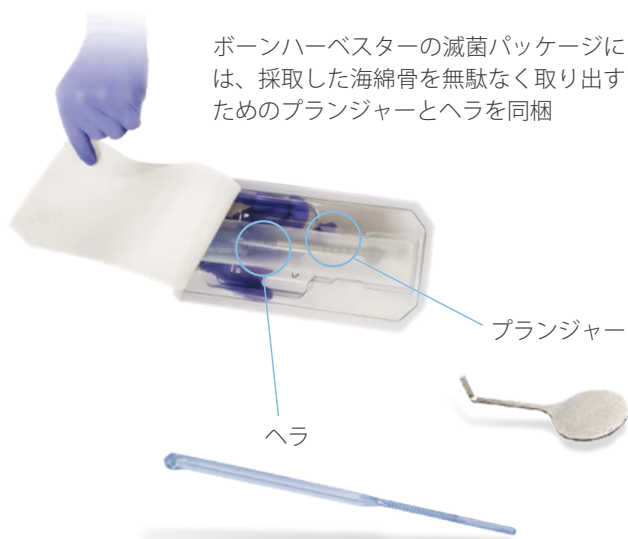

プランジャー

ヘラ

1.5 cm 程度の皮膚切開の後、専用のパイロットホールクリエイターを用いて採取部位の開孔が可能



パイロットホールクリエイター



使用手順ハイライト



製品一覧

Avitus ボーンハーベスター

カタログ No.	先端サイズ
BH-220	6 mm
BH-110	8 mm



パイロットホール クリエイター

カタログ No.	先端サイズ
PC-200	8 mm (BH-220 用)
PC-100	11 mm (BH-110 用)



Avitus ボーンデブライダー

カタログ No.	先端サイズ
BH-330	8 mm



販売名：Avitus ボーンハーベスター
医療機器製造販売認証番号：307ADBZX00015000
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用骨手術用器械
単回使用脊椎手術用器械
骨粉収集器

【禁忌・禁止】、【使用目的又は効果】、【使用上の注意】、及び不具合・有害事象等の情報については、本製品の添付文書をご参照いただくか、弊社営業担当者までご連絡ください。製品のさらなる最新の情報は、<https://www.zimmerbiomet.com/ja>にてご確認ください。
本資料は、作成あるいは改訂時の情報に基づき記載しております。薬事情報あるいは医療保険に関する情報については更新されている場合がございます。正しい情報については、当該製品の最新の添付文書及び以下厚生労働省ウェブサイトの「医療保険」の最新の診療報酬改定に関する資料をご照会ください。
[厚生労働省 医療保険ページ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/iryohoken/index.html



ジンマー バイオメット

本社 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー12階
カスタマーサービス Tel: 03-6700-1071 Fax: 0463-30-4821