

ZAP FN[®] Plate System

ZAP FN 大腿骨頸部骨折用プレートシステム




ZAP FN[®] プレートシステム

ZAP FN プレートシステムは、大腿骨頸部骨折に対し、個々の症例にあわせた理想的な固定の実現を目指して開発された専用システムです


パラレルプレート

3本のパラレルスクリューとサイドプレートを組み合わせた強固な固定

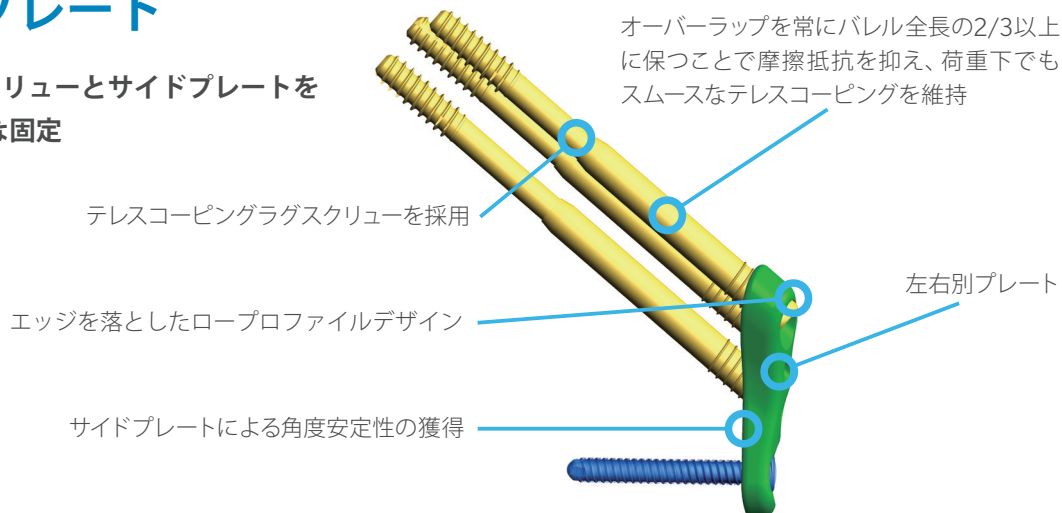


マルチアングルプレート

Pauwels type IIIや若年者の転位型骨折等、術後転位リスクの大きい骨折に対しての選択肢

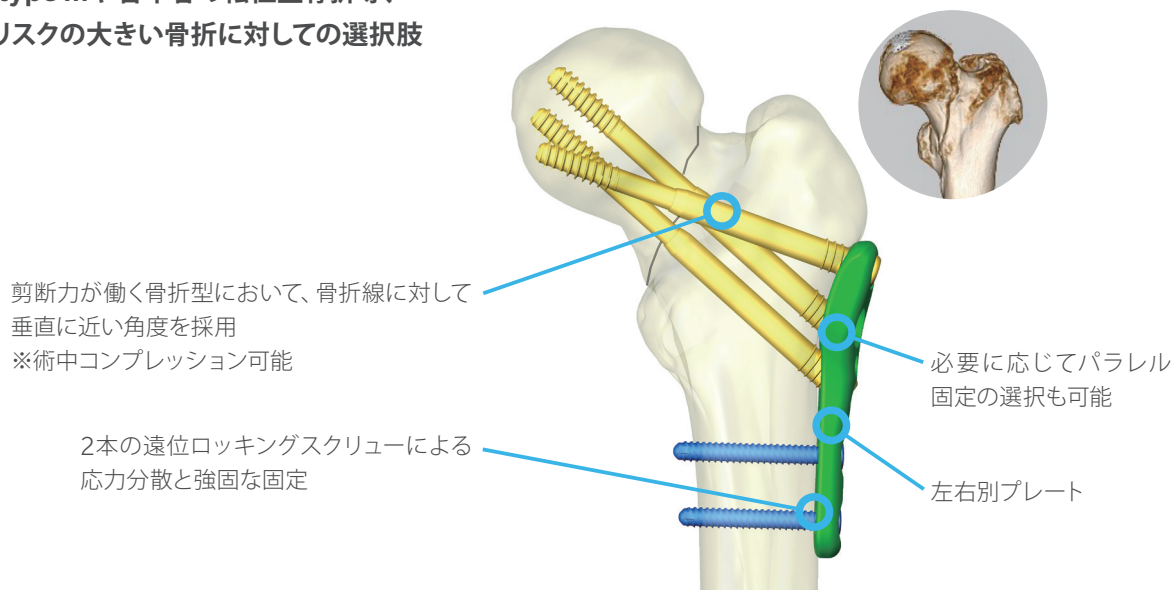

マルチプルピンニング


6.8mm テレスコーピングラグスクリューによるマルチプルピンニング手技にも対応

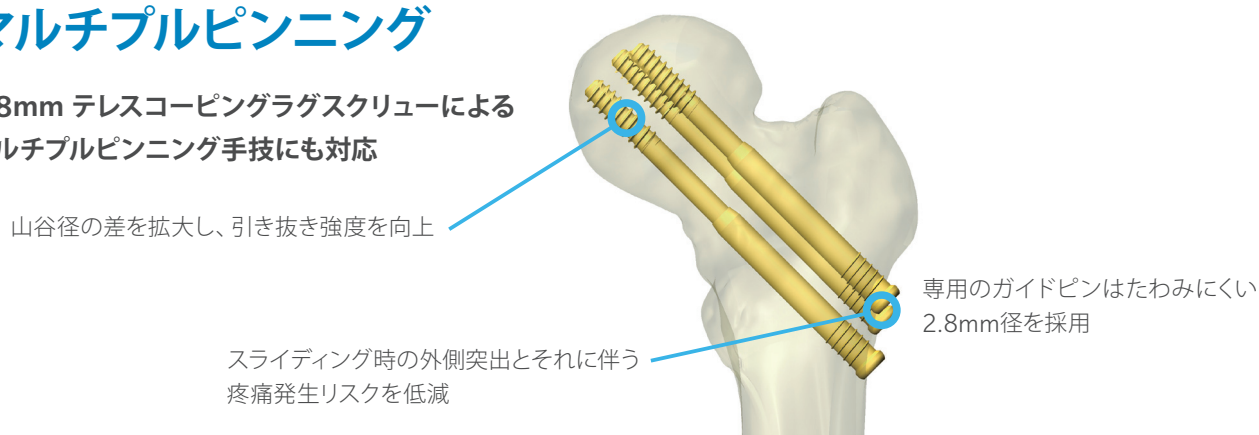

日本人の骨形態を考慮したスクリーレイアウト




3D-CTを用いた基礎研究によって得られた解析結果を基に、3本のスクリーを挿入しやすい配置を採用

大腿骨頸部の最狭部形状を考慮したスクリー配置

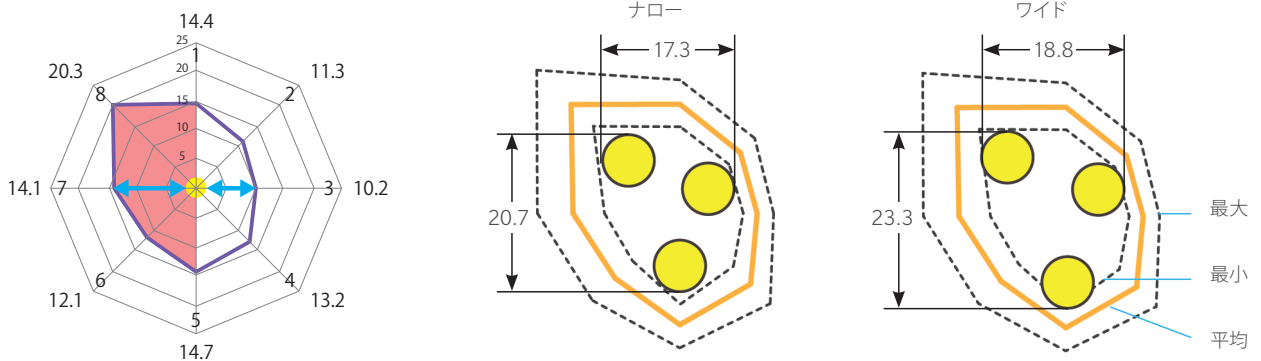



可変式の遠位ロッキングスクリー

偏心性にスクリーが挿入されることによる固定力低下や術後転子下骨折発生のリスクを低減

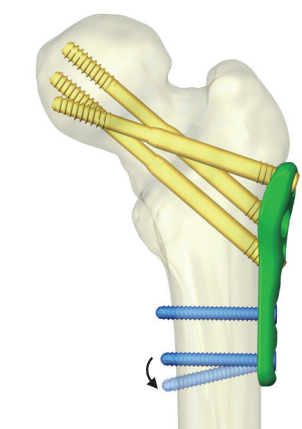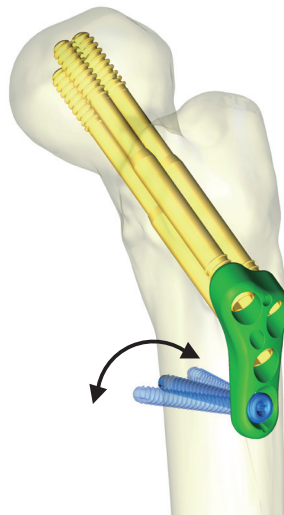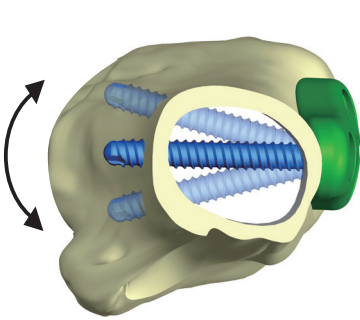


器械の操作性向上とシンプルで再現性の高い手技

トライアルプレートやマルチパーパスレンチの採用により、簡便且つ再現性の高いインプラント設置を補助

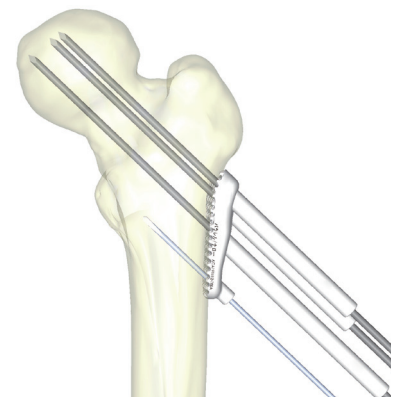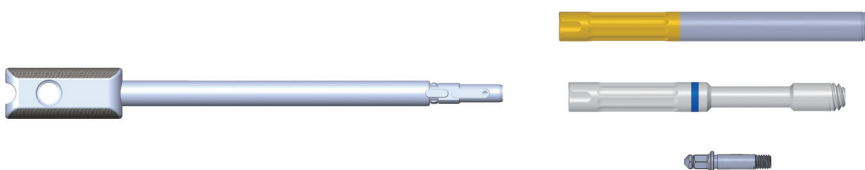

Ordering Information

ZAP FNプレート（パラレル）

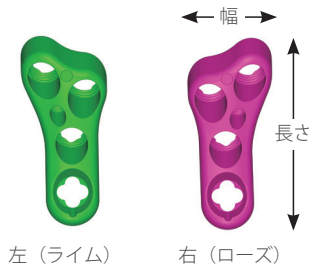カタログNo.		幅	シャフト 穴数	長さ	幅	外観
左	右					
191112-000	191111-000	ナロー	1穴	50.7mm	22.5mm	 左 (ライム) 右 (ローズ)
191212-000	191211-000	ワイド		54.7mm	24.0mm	

ZAP FNプレート（マルチアングル）

カタログNo.		幅	シャフト 穴数	長さ	幅	外観
左	右					
191322-000	191321-000	ナロー	2穴	78.0mm	22.5mm	
191422-000	191421-000	ワイド		83.0mm	24.0mm	

7.0mmテレスコーピングスクリュー

カタログNo.	長さ	外観
190000-XXX	70～120mm (5mm刻み)	

5.0mmロッキングスクリュー

カタログNo.	長さ	外観
192100-0XX	28～42mm (2mm刻み)	

製造販売元

ACTY Power

株式会社 ACTYPower

〒 520-3022

滋賀県栗東市上鉤 11-16

販売名: ZAP FN プレートシステム

医療機器製造販売承認番号: 30700BZX00010000

規制区分: 高度管理医療機器

一般的名称: 体内固定用コンプレッションヒッププレート
(体内固定用ネジ)

機能区分: 固定用内副子・FE-1

固定用内副子・F1-c-1

固定用内副子・FA-1

販売名: ZAP FN プレートシステム 滅菌器具

医療機器製造販売承認番号: 306AFBZX00079000

規制区分: 管理医療機器

一般的名称: 単回使用整形外科用バー

販売名: ZAP FN プレートシステム 手術器具

医療機器製造販売届出番号: 25B1X10004000319

規制区分: 一般医療機器

一般的名称: 骨手術用器械

本資料に示された内容の著作権、商標権、及びその他の知的財産権は、特に断りのない限り適宜 Zimmer Biomet またはその支社に帰属し、これらの全てまたは一部を Zimmer Biomet の書面による許諾なしに再利用、複製、及び公開することはできません。【禁忌・禁止】、【使用目的又は効果】、【使用上の注意】、及び不具合・有害事象等の情報については、本製品の添付文書をご参照いただくか、弊社営業担当者までご連絡ください。製品のさらなる最新の情報は、<https://www.zimmerbiomet.jp/ja> にてご確認ください。



ジンマー バイオメット

本社 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー12階

<https://www.zimmerbiomet.jp/ja>

カスタマーサービス Tel: 03-6700-1071 Fax: 0463-30-4821